



Bedienungsanleitung für das **SURVEYOR® Scan *NRAS* Kit** **Exon 2, 3 & 4 CE IVD** für DHPLC-Systeme



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, vielleicht möchten Sie später etwas nachschlagen.

Diese Seite ist absichtlich leer

Inhaltsverzeichnis

1 Hersteller	3
2 SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD	3
2.1 Verwendungszweck.....	3
2.2 Angaben zum Gebrauch	3
3 Testprinzip des SURVEYOR Scan NRAS Mutation Detection Assay	4
3.1 KRAS und NRAS	4
3.2 Analyse von Patientenproben mit den SURVEYOR Scan Kits	4
3.3 SURVEYOR Nuclease.....	5
4 Rückverfolgbarkeit der Kit-Kontrollen	6
5 Komponenten.....	7
5.1 Anzahl der Proben, die mit dem Kit getestet werden können	7
5.2 DNA-Sequenzierung	8
6 Zusätzlich erforderliche Ausrüstung und Reagenzien	8
7 Reagenzienvorbereitung	8
8 Lagerung und Haltbarkeit	9
9 Warnhinweise & Vorsichtsmaßnahmen	9
10 Primäre Probenentnahme, Handhabung und Lagerung.....	9
11 Testverfahren	10
11.1 Somatischer Mutationsnachweis mit SURVEYOR Scan Kits – Ein Überblick	10
12 Schritt-für-Schritt-Anleitung	10
12.1 DHPLC Grundeinstellung/Kalibration	10
12.2 Überlegungen vor Beginn der NRAS-Probenanalyse.....	10
12.3 Überlegungen zu den Matrizen.....	11
12.4 Überlegungen zum Arbeitsablauf.....	12
12.5 Amplifikationsprotokoll.....	14
12.6 Thermocycler-Programm für Amplifikationsprotokoll	16
12.7 Qualitätskontrolle der PCR-Produkte	16
12.8 SURVEYOR Nuclease-Verdau	17
13 Kontrollverfahren.....	19
13.1 Qualitätskontrolle für das SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD	19
13.2 Verwendung von Kontrollplasmid-DNAs.....	19
14 Interpretation der Ergebnisse	20
14.1 Analyse von NRAS Exons 2, 3 & 4 mit SURVEYOR Nuclease	20
14.2 Datenprüfung der SURVEYOR Scan-Ergebnisse.....	20
14.3 Beispielergebnisse	21
15 Leistungsmerkmale	24
15.1 Nachweisgrenze von Mutationen mit SURVEYOR Scan-Kits	24
15.2. Sequenzbestätigung	24
15.3 Verfahrensbeschränkungen	24
Anhang A	26
A.1 Plattenlayout für SURVEYOR Scan Kits.....	26
A.2 Kontroll-DNA-Stempel.....	26
A.3 HPLC (DHPLC) Systemanforderungen für die Denaturierung	27
A.4 Laborbedingungen für PCR-Tests.....	28
A.5 Literaturnachweis	29
Anhang B	30
Fehlersuche	30
Einzelheiten zur Bestellung	37
Kontaktdaten	37
Übersetzung Verzicht	37
Lizenzen, Handelsmarken & Copyright	38

1 Hersteller

Hersteller		Transgenomic, Inc. 12325 Emmet Street, Omaha, NE 68164, USA. Tel. +1-402-452-5400.
Vertreter in der EU		Transgenomic Limited, 40 Watt Road, Hillington Park, Glasgow G52 4RY, UK. Tel. +44-141-892-8800.

2 SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD

2.1 Verwendungszweck

Anwendung nur durch Fachpersonal. Transgenomics SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD ist ein *In-vitro-Diagnostikum*, das die somatischen Mutationen in Exon 2, 3 & 4 des NRAS-Gens nachweist. Diese Mutationen werden durch SURVEYOR Nuclease Zellteilungs-Spitzenwerte angezeigt und enthalten jene Mutationen mit bekanntem Potenzial für klinische Bedeutung. Dieses Kit ist für den Gebrauch in einem Labor für klinische Diagnostik durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen. Getestet wird DNA, die aus formalinfixiertem und in Paraffin eingebettetem Gewebe extrahiert wird.

Dieses Kit, Katalognummer 710400, wird in einem Karton geliefert, der die nachstehend aufgeführten Komponenten enthält. Diese Bedienungsanleitung ist auch als Download erhältlich unter <http://world.transgenomic.com/files/literature/482296-DE.pdf>.

2.2 Angaben zum Gebrauch

Mediziner können den SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD mit den DHPLC-Systemen als Hilfe bei der Entscheidung verwenden, ob Patienten mit kolorektalem Karzinom auf eine Therapie mit einem Anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor bzw. epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor)-Therapeutikum wie Panitumumab ansprechen.

Dase SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD ist für die Analyse der Proben vorgesehen, die nach Analyse mit dem SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD als KRAS Exon 2 Wild-Type bestimmt wurden. Dieses Kit sollte auch zusammen mit dem SURVEYOR Scan Kit KRAS Exon 3 & 4 CE IVD verwendet werden.

Das SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD **darf nicht** zur Diagnose von kolorektalem Karzinom oder anderer Krebsarten verwendet werden.

Das SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD weist auf die Anwesenheit von potenziellen somatischen Mutationen im NRAS-Gen Exon 2, 3 & 4 hin, bestätigt aber nicht die Sequenzidentität der Mutation. **Um nachzuweisen, um welche Mutation es sich genau handelt, sind weitere Untersuchungen wie zum Beispiel eine DNA-Sequenzierung erforderlich.**

Die mit diesem Kit erhaltenen Ergebnisse sollten ein Hinweis auf den Mutationsstatus eines Patienten sein, es müssen jedoch weitere klinische Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich Mutationen in Exon 2, 3 & 4 des NRAS-Gens. Ergebnisse mit dem SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD **dürfen nicht als die einzige Methode zur Entscheidungsfindung einer Behandlung von Patienten mit kolorektalem Karzinom herangezogen werden.**

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Gebrauch des DHPLC, um mit diesem Kit Proben mit positivem Testergebnis für eine NRAS-Mutation zu identifizieren, nur als Richtlinie verwendet und **alle Mutationen müssen durch weitere Analyse wie zum Beispiel durch eine DNA-Sequenzierung bestätigt werden.**

3 Testprinzip des SURVEYOR Scan *NRAS* Mutation Detection Assay

3.1 *KRAS* und *NRAS*

Auf den Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) gerichtete therapeutische Wirkstoffe haben sich bei kolorektalem Karzinom als wirksam erwiesen. Die Forschung hat gezeigt, dass rund 40% der kolorektalen Tumoren somatische *KRAS*-Genmutationen tragen, und klinische Studien haben bewiesen, dass Mutationen in *KRAS* Exon 2 (Codon 12 und 13) mangelndes klinisches Ansprechen auf Anti-EGFR-Therapien voraussagen. Neueste explorative Studien haben gezeigt, dass die Patientenpopulation weiter differenziert werden kann, da Patienten, deren mCRC-Tumoren eine zusätzliche Mutation in *KRAS* Exon 3 und 4 oder *NRAS* Exon 2, 3 und 4 bergen, ebenfalls dazu neigen, nicht auf eine Therapie mit Anti-EGFR anzusprechen¹⁻⁷. Dieses Kit wurde für den Gebrauch in der diagnostischen Analyse von somatischen *NRAS* Exon 2, 3 & 4 Mutationen entwickelt.

Das SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD ist ein Test für den Nachweis aller Sequenzen und kleiner Insertions-/Deletionsmutationen in Exon 2, 3 & 4 des *NRAS*-Gens. Mutationen im *NRAS* Codon 12, 13, 59, 61 und 146 wurden mit der mangelnden Wirksamkeit von Panitumumab in Verbindung gebracht. Mit diesem Kit werden Positive Controls für Mutationen in Codon 12, 61 und 146 mitgeliefert.

Dieses Kit verwendet die patentrechtlich geschützten Technologien SURVEYOR Nuclease von Transgenomic und bietet in Verbindung mit dem DHPLC eine einfache und empfindlichen Mutationsnachweis. Damit kann vor einem Hintergrund aus nicht-mutanter DNA ein Gemisch aus 2–5% mutanter DNA nachgewiesen werden. Untersuchungen zur Validierung haben eine sehr hohe Übereinstimmung mit der Sequenzierung von gut charakterisierten kolorektalen Tumorproben gezeigt. Durch die Verwendung des SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD reduziert sich für den Anwender die Sequenzierungsarbeit und ermöglicht darüber hinaus aggressive Sequenzzuordnung, wo eine automatische Sequenzierungssoftware eine Mutation oft nicht klären kann.

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit hinsichtlich der Sanger-Sequenzierung wird empfohlen, die Laboreinrichtung zu optimieren, um eine Kreuzkontamination von Proben oder Kontrollen zu vermeiden. Ein Beispiel einer idealen Laboreinrichtung finden Sie im **Anhang A.4 Laboreinrichtung für PCR-Tests**.

3.2 Analyse von Patientenproben mit den SURVEYOR Scan Kits

Das SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD darf nur zusammen mit einem der unten genannten Arbeitsabläufen verwendet werden.

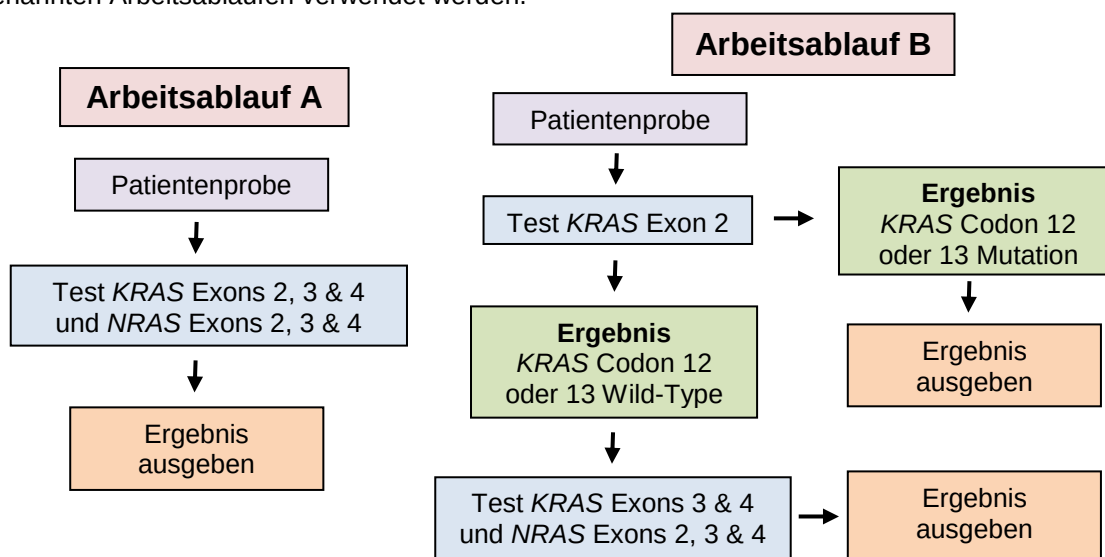


Abbildung 1 SURVEYOR Scan Mutation Detection Kit Arbeitsabläufe für das Screening auf *KRAS* und *NRAS*

Als Vorschlag, wie 96-Loch-Mikrotiterplatte für die Analyse von *KRAS* und *NRAS* Exon 2-4 anzulegen ist, siehe **Anhang A.1 Plattenlayout für SURVEYOR Scan Kits**.

3.3 SURVEYOR Nuclease

Die SURVEYOR Nuclease von Transgenomic ist eine mismatch-spezifische Pflanzen-DNA-Endonuclease, die die Heteroduplex-DNA auf bekannte und unbekannte Mutationen und Polymorphismen durchsuchen kann⁸. Das Enzym schneidet mit hoher Spezifität einen DNA-Doppelstrang an Stellen, wo durch einen Basenaustausch oder andere Sequenzveränderungen Basen nicht miteinander paaren können. Diese DNA-Nuclease spaltet beide Stränge eines DNA-Heteroduplex am 3'-Ende der Mismatch-Stelle. Insertion-/Deletion-Mismatches und alle Basenaustausch-Mismatches werden erkannt, aber die Spalteffizienz variiert mit der Mismatch-Sequenz.

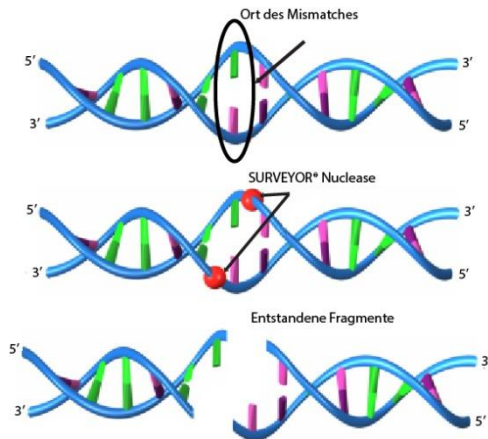


Abbildung 2: Wirkungsweise der SURVEYOR Nuclease Die Endonuclease erkennt ein Mismatch und spaltet am 3'-Ende der Mismatch-Basen. Das spaltet den DNA-Doppelstrang, was einen einzigen 3'-Basenüberhang hinterlässt.

Die SURVEYOR Nuclease wurde in einer ganzen Reihe von Projekten eingesetzt, um in Genen eine Vielzahl von Mutationen und Polymorphismen nachzuweisen. Insbesondere wird die SURVEYOR Nuclease verwendet, um in einer Reihe von Genen bekannte Mutationen zu bestätigen, die mit Nieren-, Lungen-, Kopf- und Halskrebs sowie Leukämie und Endometriumkarzinom in Verbindung gebracht werden. Ebenso wurde sie zur Ergebnisprognose einer Strahlentherapie eingesetzt^{9,10,11}.

Das SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD ist zur Spaltung von Mismatches im *NRAS* Exon 2, 3 & 4 und der anschließenden Analyse durch das DHPLC vorgesehen.

Anmerkung: Wenn eine Probe 100 % mutante DNA ist, können keine Heteroduplexe gebildet werden und die Probe erscheint als "Wild-Type". Allerdings enthalten aufgrund von Tumorerheterogenität und/oder kontaminierendem normalen Gewebe Biopsieproben von Tumoren Wild-Type-Zellen; bitte beachten Sie, dass mit diesem Kit 5% Wild-Type nachweisbar ist mit Spuren, die mit 5% mutanter DNA identisch sind.

Anmerkung: Für diesen Test ausschließlich die mit diesem Kit mitgelieferte DNA-Polymerase verwenden.

Anmerkung: Befolgen Sie bitte die spezifischen Anleitungen im Bedienungshandbuch Ihres DHPLC-Systems.

Um dieses Kit erfolgreich einzusetzen, wird dringend angeraten, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und alle darin gegebenen Anleitungen und Richtlinien genau zu befolgen. Personen, die diesen Test zum ersten Mal durchführen, sollten die in Abschnitt *Verwendung der Kontrollplasmid-DNAs* beschriebenen Kontrolluntersuchungen durchführen.

Falls Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie (888) 233-9283 (nur Nordamerika), +1 (402) 452-5400 oder +44 (0) 141 892 8800 (Europa) an und fragen Sie nach dem „*NRAS* Support“. Alternativ können Sie eine E-Mail senden an:

SURVEYORscan@Transgenomic.com

4 Rückverfolgbarkeit der Kit-Kontrollen

Die mit diesem Kit mitgelieferten Kontrollen sind Plasmidklone der Sequenzen *NRAS* Exon 2, 3 & 4. Alle Klone wurden sequenziert, um sie durch Vergleich mit der NCBI Reference Sequence auf Sequenztreue zu überprüfen: NG_007572.

Die Kontrollen haben einen genetischen "Stempel". Siehe **Anhang A.2 Kontroll-DNA-Stempel**; diese Variationen von der *NRAS*-Wild-Type-Sequenz, in einem Bereich, in dem keine Mutationen erwartet werden, können verwendet werden, um Probleme mit der Probenkontamination durch Positive Controls zu erkennen. Siehe **Anhang B - Fehlersuche, Problem 8**, für ein Beispiel einer SURVEYOR Scan-Spur einer solchen Kontamination.

Der "**NRAS Control Wild-Type**" wurde durch Synthese und Klonierung von *NRAS* Exon 2, 3 und 4 unter Verwendung der NCBI Reference Sequence oben konstruiert.

Das "**NRAS Positive Control Exon 2**" wurde durch Synthese von *NRAS* Exon 2 unter Verwendung der NCBI Reference oben konstruiert, enthält aber die G12D-Mutation. Durch DNA-Sequenzierung wurde bestätigt, dass die einzige Änderung in der Sequenz von Codon 12 in einer G12D, GGT>GAT-Alteration vorliegt. Dieser Klon wird dann mit *NRAS* Control Wild-Type-DNA gemischt, um eine heterozygote Mischung zu erhalten.

Das "**NRAS Positive Control Exon 3**" wurde durch Synthese von *NRAS* Exon 3 unter Verwendung der NCBI Reference oben konstruiert, enthält aber die Q61K-Mutation. Durch DNA-Sequenzierung wurde bestätigt, dass die einzige Änderung in der Sequenz von Codon 61 in einer Q61K-Alteration (CAA>AAA) vorliegt. Dieser Klon wird dann mit *NRAS* Control Wild-Type-DNA gemischt, um eine heterozygote Mischung zu erhalten.

Das "**NRAS Positive Control Exon 4**" wurde durch Synthese von *NRAS* Exon 4 unter Verwendung der NCBI Reference oben konstruiert, enthält aber die A146T-Mutation. Durch DNA-Sequenzierung wurde bestätigt, dass die einzige Änderung in der Sequenz von Codon 146 in einer A146T-Alteration (GCC>ACC) vorliegt. Dieser Klon wird dann mit *NRAS* Control Wild-Type-DNA gemischt, um eine heterozygote Mischung zu erhalten.

5 Komponenten

Das SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD besteht aus (1) einer **SURVEYOR-Box mit Verdau-Komponenten** mit 10 Reagenzgefäßen ohne leere Löcher und (2) einer äußeren Halterung für **PCR-Komponenten und Kontrollröhrchen** mit 13 Reagenzgefäßen und 7 leeren Löchern.

Katalog-nummer	Kit-Komponente	Reaktionsgefäß Deckelfarbe	Kit für 100 Testreaktionen gelieferte Menge
SURVEYOR-Box mit Verdau-Komponenten			
710160	SURVEYOR Nuclease W	Violett	2 x 105 µL
710161	SURVEYOR Enhancer W2	Schwarz	105 µL
708049	SURVEYOR Enhancer Cofactor	Rosa	105 µL
708027	0.15 M MgCl ₂ Solution	Braun	105 µL
708030	SURVEYOR Stop Solution	Rot	250 µL
710153F	Universal Sequencing Primer 1 (10 µM)	Orange	2 x 125 µL
710153R	Universal Sequencing Primer 2 (10 µM)	Orange	2 x 125 µL
PCR-Box mit Komponenten und Kontrollen			
703310	DNA Polymerase	Rot	100 µL
703315	DNA Polymerase 10X PCR Buffer	Durchsichtig	1 mL
703065	dNTPs (10 mM)	Durchsichtig	500 µL
710452F	<i>NRAS</i> Primer Exon 2 Forward (10 µM)	Blau	90 µL
710452R	<i>NRAS</i> Primer Exon 2 Reverse (10 µM)	Blau	90 µL
710453F	<i>NRAS</i> Primer Exon 3 Forward (10 µM)	Blau	90 µL
710453R	<i>NRAS</i> Primer Exon 3 Reverse (10 µM)	Blau	90 µL
710454F	<i>NRAS</i> Primer Exon 4 Forward (10 µM)	Blau	90 µL
710454R	<i>NRAS</i> Primer Exon 4 Reverse (10 µM)	Blau	90 µL
710441	<i>NRAS</i> Control Wild-Type Mix	Gelb	120 µL
710442	<i>NRAS</i> Positive Control Exon 2	Grün	40 µL
710443	<i>NRAS</i> Positive Control Exon 3	Grün	40 µL
710444	<i>NRAS</i> Positive Control Exon 4	Grün	40 µL
482296	Bedienungsanleitung	Download von der Webseite* http://world.Transgenomic.com/files/literature/482296-DE.pdf	

5.1 Anzahl der Proben, die mit dem Kit getestet werden können

Das SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD können 100 Reaktionen getestet werden. Die Gesamtprobenanzahl hängt von der Größe der jeweiligen durchschnittlichen Seriengrößen zu testender Proben ab, da mit jeder Probenserie jeweils ein Satz Kontrollreaktionen (Wild-Type Controls, Positive Controls und No Template Controls) auf jeder Mikrotiterplatte mitgeführt werden muss. In der nachstehenden Tabelle ist die Anzahl Proben aufgeführt, die mit dem *NRAS*-Kit je nach durchschnittlicher Größe der Probenserie getestet werden können. Die Berechnung beruht auf der Basis, dass (a) jede Serie 9 Kontrollen (3x Wild-Type, 3x Positive Controls, 3x No Template Controls) benötigt, und (b) jedes Kit für 100 Reaktionen ausgelegt ist.

Anmerkung: Wenn mehrere Platten laufen sollen, muss auf jeder einzelnen Platte ein Satz der 9 oben angegebenen Kontrollen mitgeführt werden. Daher benötigen zwei Platten insgesamt 18 Kontrollreaktionen, 3 Platten benötigen 27 Kontrollreaktionen, usw.

Mit Ansteigen der Größe der Probenserie erhöht sich auch die Anzahl der Proben, die insgesamt mit einem Kit getestet werden können, wodurch sich die Reagenzienkosten je Probe im Durchschnitt reduzieren. Die Tabelle unten dient als Orientierung dafür, wie viel Proben mit einem einzigen Kit getestet werden können. Ein geschätzter Wert für voraussichtliche Verluste durch Pipettieren wird mit einbezogen.

Größe der Proben-serie	Anz. Kontrollreaktionens + Anz. Proben-Amplikons + Zugabe Pipettierverlust	Anz. erforderl. Reaktionen pro Lauf	Gesamt-anz. Proben-serienläufe pro Kit	Gesamtanz. getesteter Proben pro Kit
1	9 + 3	12	8	8
2	9 + 6	15	6	12
3	9 + 9	18	5	15
4	9 + 12	21	4	16
5	9 + 15	24	4	20

5.2 DNA-Sequenzierung

Universal Sequencing Primer (PNs 710153F und 710153R) werden für die DNA-Sequenzierung aller getesteten Proben geliefert. Die vor dem SURVEYOR Nuclease-Verdau erzeugten PCR-Amplikons sollten für die Sequenzierung verwendet werden.

6 Zusätzlich erforderliche Ausrüstung und Reagenzien

Folgende Komponenten bzw. Ausrüstungen sind für die Verwendung des SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD mit dem DHPLC zusätzlich erforderlich:

- DHPLC-System, Säulen, Puffer, DNA-Größenstandard
 - siehe **Anhang A.3.1 DHPLC Spezifikationen für SURVEYOR SCAN Anwendungen** für Merkmale eines geeigneten DHPLC-System zur Verwendung mit diesem Kit
- Hochreines Wasser für die Molekularbiologie
- 0,2-mL-PCR-Reaktionsgefäße, Streifen oder 96-Loch-Mikrotiterplatte
- Mikropipetten
- Pipettenspitzen
- Eisbad
- Vortexer
- Mikrozentrifuge
- Thermocycler
- Agarosegele und Ausrüstung für Agarosegel-Elektrophorese
- 10% Bleiche oder ähnliches Reinigungsmittel

7 Reagenzienvorbereitung

Alle Reagenzien dieses Kits sind gebrauchsfertig. Einige Komponenten müssen vor Gebrauch aufgetaut, mit dem Vortexer gemischt oder in einer Mikrozentrifuge zentrifugiert werden. Einzelheiten siehe weiter unten unter **Testverfahren**. Reagenzien müssen zur Herstellung von Master-Mix und Reaktionsgemischen gemischt werden. Eine genaue Anleitung finden Sie im Abschnitt **Testverfahren**.

8 Lagerung und Haltbarkeit

Das Kit muss bis zu seinem Gebrauch zwischen -18 °C und -25 °C in einem Gefrierschrank mit konstanter Temperatur aufbewahrt werden. Beachten Sie bei jedem erhaltenen Kit das Verfallsdatum. Das Kit nicht mehr verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.

Das in Schritt 7 des **SURVEYOR Nuclease-Verdaus** vorbereitete SURVEYOR Nuclease-Reaktionsgemisch muss **sofort** verwendet werden, da die Anwesenheit anderer Komponenten im SURVEYOR Nuclease-Reaktionsgemisch die SURVEYOR Nuclease W mit der Zeit inaktiviert.

9 Warnhinweise & Vorsichtsmaßnahmen

Keines der Reagenzien in diesem Kit stellt in den gelieferten Mengen eine Gesundheitsgefährdung dar. Die Dokumentnummer von Transgenomic MSD-710400 steht als Download zur Verfügung:

<http://world.Transgenomic.com/files/literature/710400-DE.pdf>

Dieses Kit enthält keine Substanzen tierischen oder menschlichen Ursprungs, die ein Infektionsrisiko darstellen können.

Dieses Kit darf nur von Personen verwendet werden, die in den entsprechenden Labortechniken ausgebildet wurden. Beim Arbeiten mit den Kitkomponenten immer einen geeigneten Laborkittel, Einmalhandschuhe und Augenschutz tragen. Nach dem Gebrauch müssen die Kitkomponenten als klinischer Abfall und gemäß der für sie anwendbaren Gesetze und Verordnungen entsorgt werden.

Aus den Gefäßen pipettierte Reagenzienaliquots dieses Kits sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Es konnte validiert werden, dass Kitkomponenten auch nach 25 Auftau-/Einfrierzyklen noch stabil sind. Verwenden Sie das Kit nicht, wenn diese Anzahl Zyklen überschritten wurde.

10 Primäre Probenentnahme, Handhabung und Lagerung

Das SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD benötigt DNA, die aus formalinfixierten, paraffineingebetteten (FFPE) kolorektalen Tumorproben extrahiert wurde. Für eine optimale DNA-Extraktion muss das Gewebe 14-24 Stunden in Formalin fixiert werden.

Tumorbiopsien sind eine heterogene Mischung aus Tumorzellen und Nicht-Tumorzellen. Außerdem ist der Tumor an sich eine heterogene Mischung aus Tumorzellen **mit** Mutationen und Tumorzellen **ohne** Mutationen. Da diese somatischen Mutationen möglicherweise nicht gleichmäßig im Tumor verteilt sind, kann die aus verschiedenen Bereichen desselben Tumors resultierende Mutationsanalyse unterschiedlich ausfallen. Um die Wahrscheinlichkeit für einen Mutationsnachweis zu erhöhen, sollte die DNA aus der Tumorregion des Gewebes isoliert werden, indem nur der Tumorbereich von dem Glasobjektträger abgeschabt wird. Dazu für jeden neuen Objektträger ein frisches, steriles Skalpell verwenden.

Für eine erfolgreiche Verwendung dieses Kits sollte die entnommene DNA den Kriterien entsprechen, die in den **Überlegungen zu den Matrizen** aufgelistet sind.


ANMERKUNG: Entnommene DNA-Proben, die mit diesem Kit nicht sofort analysiert werden, müssen bei -20 °C bis -80 °C eingefroren aufbewahrt werden.

11 Testverfahren

11.1 Somatischer Mutationsnachweis mit SURVEYOR Scan Kits – Ein Überblick

Nachweis und Bestätigung einer Mutation mit der SURVEYOR Nuclease umfasst drei Schritte:

SURVEYOR Scan Vorbereitung zum Screening in drei einfachen Arbeitsschritten

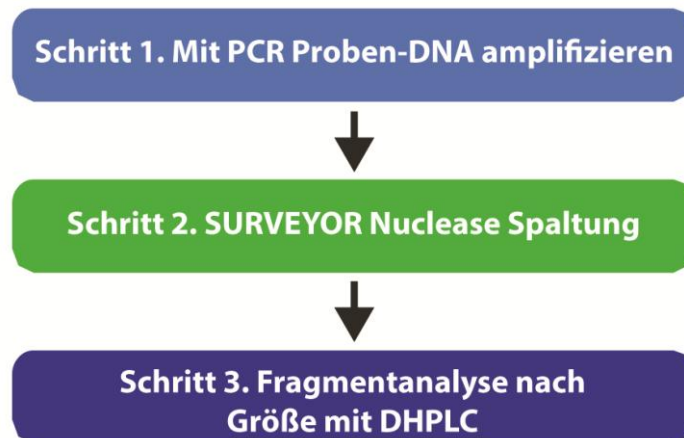

Schritt 1 – Vorbereiten der PCR-Amplikons aus mutanter (Test) und normaler (Referenz) DNA. Anschließend an den letzten PCR-Amplifikationszyklus wird zum Schmelzen sämtlicher Doppelstränge das PCR-Produkt erhitzt und dann zur optimalen Bildung von Hetero- und Homoduplexen langsam abgekühlt (Heteroduplexe kommen vor, wenn ein Strang einer Wild-Type-Sequenz mit einem Strang einer mutanten Sequenz abkühlt).

Schritt 2 – Behandlung des hybridisierten Heteroduplex-Homoduplex-Gemischs mit SURVEYOR Nuclease. SURVEYOR Nuclease schneidet beide Stränge der Heteroduplex-DNA und lässt DNA-Fragmente entstehen. Die gleichbehandelte Control Wild-Type-DNA dient als Hintergrundkontrolle.

Schritt 3 – Analyse der DNA-Fragmente mit dem DHPLC-System. Die Bildung neuer Spaltprodukte aufgrund von einem (bzw. mehreren) Mismatch wird durch zusätzliche chromatografische Peaks angezeigt. Die Retentionszeit der Spaltprodukte weist auf die Größe der Fragmente und daher den ungefähren Ort des/der Mismatches hin.

12 Schritt-für-Schritt-Anleitung

12.1 DHPLC Grundeinstellung/Kalibration

Wenn Sie die SURVEYOR Nuclease-Platte zur Analyse mit dem DHPLC einstellen, schlagen Sie bitte im **Anhang A.3 HPLC (DHPLC) Systemanforderungen für die Denaturierung**.

12.2 Überlegungen vor Beginn der NRAS-Probenanalyse

Bevor Sie Proben auf einem DHPLC-System laufen lassen, muss ein geeigneter DNA-Größenstandard getestet werden, um zu gewährleisten, dass das System einwandfrei funktioniert. Das Laborpersonal, das mit dem Instrument arbeitet, sollte vor Durchführung der Analyse die Qualität des DNA-Größenstandards prüfen.

12.3 Überlegungen zu den Matrizen

1. Verwenden Sie für die FFPE-isolierte Matrizen-DNA die üblichen Labortechniken, um die Qualität und Quantität der extrahierten DNA zu bewerten, und um zu gewährleisten, dass für die PCR ausreichend Matrize vorhanden ist.
2. Das 260:280 Absorptionsverhältnis muss größer als 1,80 sein.
3. Um das PCR-Setup zu beschleunigen, stellen Sie die Gebrauchskonzentration der Matrize auf ungefähr 12,5 ng/μL ein. Verdünnen Sie bei Bedarf die Matrizen-DNA mit hoch reinem Wasser für die Molekularbiologie.

12.4 Überlegungen zum Arbeitsablauf

Das Kit ist für die Analyse von 100 Reaktionen ausgelegt. Kleinere Probenserien können ausgeführt werden, aber die Kit-Kontrolle und eine "No Template Control" müssen bei jeder Probenserie mitgeführt werden. Im Kit ist ausreichend Kontrollmaterial für 100 Reaktionen aller Kombinationen der zu verwendenden Probenseriengrößen.

Im Allgemeinen sollte die Probenverarbeitung von Anfang bis Ende so ausgeführt werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn die Verarbeitung einer Probe vor der Fertigstellung aller Schritte unterbrochen werden muss, sollte die DNA bei angegebener Stelle bei -20 °C gelagert werden. Allerdings sollten gefrorene Proben nicht wiederholten Einfrier-/Auftauzyklen ausgesetzt werden, und die Tiefkühlagerung (-18 bis -25 °C) von PCR-amplifizierter DNA bzw. SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukten über einen Zeitraum (>1 Woche) sollte vermieden werden.

Die Probenanalyse sollte dem unten aufgeführten Arbeitsablauf folgen:

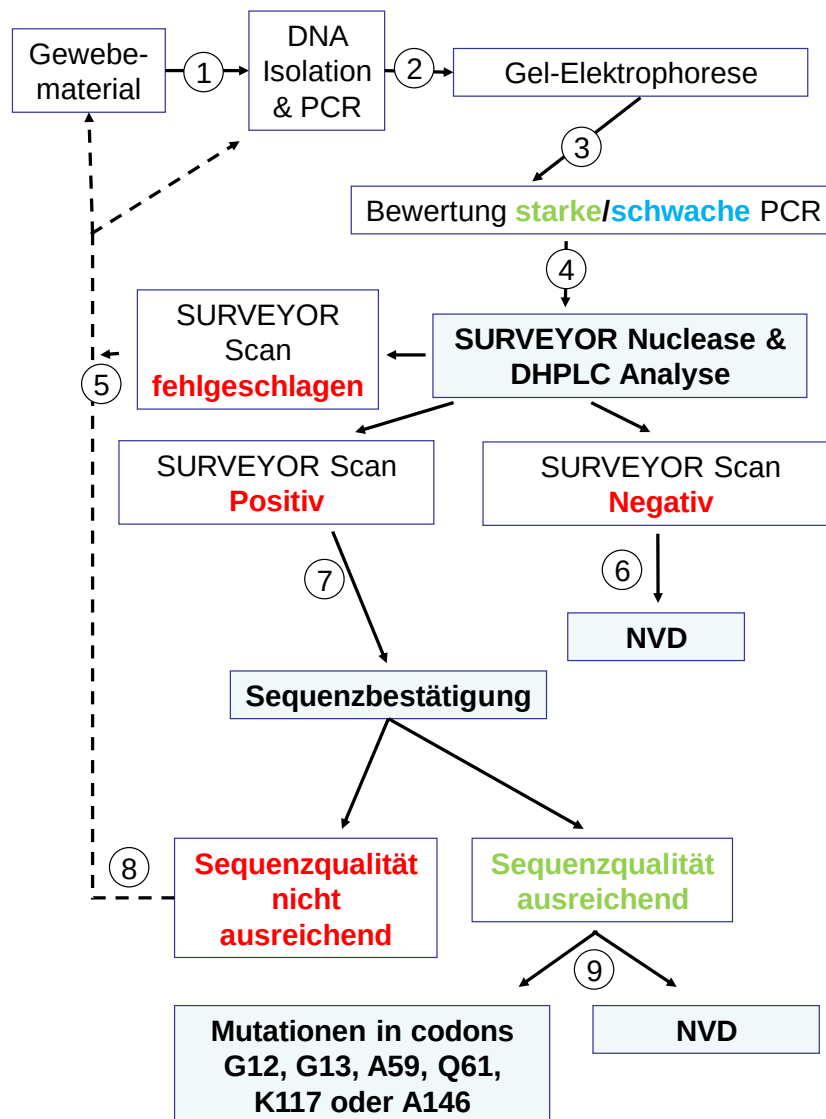


Abbildung 3 Arbeitsablauf der SURVEYOR Scan NRAS Kit Analyse

Anmerkungen zu Abbildung 3

1. Isolieren Sie die DNA von FFPE und verwenden Sie dazu Standardlabortechniken.
2. Führen Sie die PCR durch und prüfen Sie die DNA-Qualität durch Gelelektrophorese.
3. Dokumentieren Sie, ob die Bande **stark** (≥ 20 ng/ μ L) oder **schwach** (< 20 ng/ μ L) ist.

Bereiten Sie aus FFPE frische genomische DNA vor, wenn mehrere PCR-Banden vorliegen.

4. Bei Proben, die nach der PCR-Amplifizierung als **starke PCR** oder **schwache PCR** bewertet wurden, kann die Behandlung mit SURVEYOR Nuclease und Analyse mit dem DHPLC-System angeschlossen werden.

Beachten Sie, dass mit einer schwachen PCR-Zuordnung unzureichende DNA für das Erzielen aussagefähiger Ergebnisse mit DHPLC, aber genug DNA für die Sequenzierung vorhanden sein kann.

5. Siehe **Anhang B – Fehlersuche** für Beispiele fehlgeschlagener SURVEYOR Scan-Ergebnisse. Alle Proben mit dem Ergebnis SURVEYOR Scan fehlgeschlagen sollten noch mal neu bearbeitet werden:
 - a. Wenn noch ausreichend genomische DNA vorhanden ist, die PCR wiederholen.
 - b. Aus FFPE erneut DNA extrahieren; dies muss die zweite Wahl sein, da es normalerweise nicht wünschenswert ist, einen FFPE-Block nachzuschneiden.
 - c. Wenn ein anderer Gewebeschnitt oder -Block verwendet wird, muss der gesamte Test wiederholt werden, da es aufgrund der Tumorerheterogenität zu Abweichungen im Verdau kommen kann.
6. Wenn keine Spalt-Peaks sichtbar sind, für den SURVEYOR Scan ein negatives Ergebnis angeben, d. h. NVD = No Variant Detected (keine Variante nachgewiesen).
7. Wenn eine Probe SURVEYOR Nuclease Spaltprodukte anzeigt (entspricht nicht der jeweiligen Wild-Type Control), sollte sie zur Sequenzbestätigung gesandt werden..
8. Wenn die Sequenzbestätigung nicht annehmbar ist, dann:
 - a. Wenn noch ausreichend genomische DNA vorhanden ist, die PCR wiederholen.
 - b. Aus FFPE erneut DNA extrahieren; dies muss die zweite Wahl sein, da es normalerweise nicht wünschenswert ist, einen FFPE-Block nachzuschneiden.
9. Bei einer akzeptablen Bestätigungsanalyse sollte eines der folgenden Resultate zutreffen:
 - a. Wild-Type-Sequenz, das heißt No Variant Detected (NVD, keine Variante nachgewiesen), oder
 - b. Variant Detected (Variante nachgewiesen). Wenn die Sequenzbestätigung eine Änderung der Basensequenz anzeigt, die zu einer Veränderung einer Aminosäure führt bei:
 - i. Codon 12
 - ii. Codon 13
 - iii. Codon 59
 - iv. Codon 61
 - v. Codon 117 oder
 - vi. Codon 146

ist dies als *NRAS*-Mutation positiv zu bewerten.

Anmerkung: Es ist möglich, eine positive SURVEYOR Scan-Zuordnung zu haben, der bei der Sequenzbestätigung zudem in ein "No Variant Detected" (keine Variante festgestellt) resultiert. Die Nachweisgrenze (Level of Detection, LoD) der SURVEYOR Nuclease auf einem DHPLC-System

ist für einige Mutationen so gering wie 2% Mutant in 98% Wild-Type-DNA, wohingegen das LoD der Sequenzierung circa 10-25% Mutant in 90-75% Wild-Type-DNA beträgt.

Anmerkung: Wenn eine Probe 100% mutante DNA ist, können keine Heteroduplices gebildet werden und die Probe erscheint als "Wild-Type". Proben aus Tumorbiopsien enthalten allerdings aufgrund der Tumorerheterogenität und/oder kontaminierendem normalen Gewebe Wild-Type-Zellen; mit diesem Kit ist 5% Wild-Type nachweisbar mit Spuren, die mit 5% mutanter DNA identisch sind.

Anmerkung: Positive SURVEYOR Scan-Ergebnisse können sich aufgrund von Veränderungen in der Basensequenz von denen unterscheiden, die *NRAS*-aktivierend sind. Obwohl diese Mutationen selten sind, ist eine Bestätigung durch eine andere Methode (z. B. DNA-Sequenzierung) erforderlich, um zu bestimmen, ob ein positives SURVEYOR Scan-Ergebnis tatsächlich eine *NRAS*-aktivierende Mutation ist.

Anmerkung: Das Formalinfixierungsverfahren, das für die Vorbereitung von FFPE-Tumorbiopsieproben verwendet wird, kann zu einer Cytosin-Desaminierung führen. Diese Desaminierung wandelt Cytosin in Uracil um. Die Polymerase „liest“ dieses Uracil als ein Thymin und bindet ein Adenin in die duplizierten Stränge ein. Dies scheint dann eine Mutation zu sein, bei der das normale G jetzt durch ein A ersetzt wird und eine G/C- zu A/T-Mutation verursacht, die eine Artefaktmutation durch den Fixierungsprozess und keine echte somatische Mutation ist. Diese Vorfälle sind selten, wenn sie jedoch für im PCR-Cycling dupliziert werden, sehen sie wie Mutationen aus. Sie reagieren nicht auf eine erneute Analyse.

Ein Beispiel für eine mögliche Mutation durch Cytosin-Desaminierung, die für eine Bestimmung der Patiententherapie herangezogen würde, ist *NRAS* A146T.

- Codon 146: GCC>ACC (A146T)

Daher wird empfohlen, dass alle diese Mutationen durch Doppelanalyse für dieselbe genomische DNA bestätigt oder alle Proben ab Analysebeginn im Doppelansatz durchgeführt werden.

12.5 Amplifikationsprotokoll

1. Die vorgemischte dNTP-Lösung (PN 703065) von Transgenomic wird in einer Gebrauchskonzentration von 10 mM Gesamtdeoxynucleotid (je 2,5 mM der vier Deoxynucleotide) geliefert.
2. Die *NRAS* Exon 2, Exon 3 und Exon 4 Forward und Reverse PCR-Primer (PN 710452F/R, 710453F/R und 710454F/R) werden bei 10 µM geliefert.
3. Nehmen Sie die 10 µM Primer, 10 mM dNTPs und den DNA Polymerase 10X PCR Buffer (PN 703315) aus dem Gefrierschrank und lassen alles auf Eis auftauen.
4. Nach dem Auftauen: Geben Sie alle Kit-Komponenten in den Vortexer (~10 Sekunden), um sorgfältig zu mischen, zentrifugieren Sie kurz an (~10 Sekunden), um zu gewährleisten, dass keine Flüssigkeit auf den Behälterdeckeln bleibt, und legen Sie sie auf Eis.
5. Bereiten Sie auf Eis die jeweiligen Master-Mix vor.
6. Richten Sie sich bei der Zubereitung eines Master Mix für jede *NRAS* Exon 2, *NRAS* Exon 3 und *NRAS* Exon 4 Reaktion nach folgender Tabelle:

Anzahl der Reaktionen:	10
Volumenberechnung:	
Volumen Wasser (µL)	330**
DNA Polymerase 10X PCR Buffer (µL)	50
dNTPs (µL)	40
<i>NRAS</i> Primer Exon 2, 3 oder 4 Forward (µL)	25
<i>NRAS</i> Primer Exon 2, 3 oder 4 Reverse (µL)	25
DNA Polymerase (µL)	10
Master-Mix-Gesamtvolumen	48,0

****Anmerkung: Der Anwender sollte auf ein Minimum von 25 ng DNA je 50 µL Reaktion abzielen.** Erhöhen Sie für extrahierte DNA-Konzentrationen mit weniger als 12,5 ng/µL proportional das Volumen extrahierter DNA, um je Reaktion 25 ng zu erhalten. Reduzieren Sie auch um dieselbe Menge den Wasseranteil in dem jeweiligen Master-Mix, um je Reaktion 50 µL zu erhalten. **Alle mit diesen Master-Mix vorbereiteten Proben brauchen extrahierte DNA, die auf annähernd dasselbe niedrigste Konzentrationsniveau verdünnt ist.** Es ist nicht empfehlenswert, Konzentrationen extrahierter DNA mit weniger als 5 ng/µL einzusetzen.

7. Berechnen Sie die erforderlichen Volumina für alle Master-Mix-Lösungen anhand der Tabelle oben. Beachten Sie dabei Folgendes:

- (a) **Für Master Mix 1, NRAS Exon 2**, sind drei zusätzliche Reaktionen erforderlich für NRAS Control Wild-Type, NRAS Positive Control Exon 2 und NRAS Exon 2 No Template Control (NTC1).
- (b) **Für Master Mix 2, NRAS Exon 3**, sind drei zusätzliche Reaktionen erforderlich für NRAS Control Wild-Type, NRAS Positive Control Exon 3 und NRAS Exon 3 No Template Control (NTC1).
- (c) **Für Master Mix 3, NRAS Exon 4**, sind drei zusätzliche Reaktionen erforderlich für NRAS Control Wild-Type, NRAS Positive Control Exon 4 und NRAS Exon 4 No Template Control (NTC1).

Anmerkung: Berücksichtigen Sie, dass etwas mehr Master-Mix als in dieser Berechnung angegeben benötigt wird, um Verluste während des Pipettierens auszugleichen.

- 8. Beschriften Sie 0,2-mL-PCR-Reaktionsgefäße oder die Vertiefungen einer 96-Loch-Mikrotiterplatte mit den erforderlichen Probeninformationen.
- 9. Beschriften Sie 2,0-mL-Zentrifugenröhrchen für den jeweiligen vorbereiteten Master-Mix.
- 10. Fügen Sie diesen 2,0-mL-Zentrifugenröhrchen mit der Beschriftung „Master-Mix“ das erforderliche Volumen an hoch reinem Wasser für die Molekularbiologie hinzu.
- 11. Fügen Sie den Master-Mix-Röhrchen die erforderliche Menge DNA Polymerase 10X PCR Buffer hinzu.
- 12. Fügen Sie den Master-Mix-Röhrchen das erforderliche Volumen an 10 mM dNTPs hinzu.
- 13. Fügen Sie den jeweiligen Master-Mix-Röhrchen das erforderliche Volumen der NRAS Forward Primer hinzu.
- 14. Fügen Sie den jeweiligen Master-Mix-Röhrchen das erforderliche Volumen der NRAS Reverse Primer hinzu.
- 15. Nehmen Sie die DNA Polymerase (PN 703310) aus dem Gefrierschrank.
- 16. Zentrifugieren Sie die DNA Polymerase für ~10 Sekunden.
- 17. Mischen Sie die DNA Polymerase für ~10 Sekunden mit dem Vortexer.
- 18. Fügen Sie den Master-Mix-Röhrchen das erforderliche Volumen DNA Polymerase hinzu.
- 19. Verschließen Sie die Master-Mix-Zentrifugenröhrchen.
- 20. Mischen Sie vor Gebrauch die Zentrifugenröhrchen mit dem Master-Mix mit dem Vortexer (~30 Sekunden) und zentrifugieren sie dann kurz an (~10 Sekunden).
- 21. Lagern Sie es bis zum Gebrauch auf Eis.
- 22. Pipettieren Sie 48,0 µL (siehe Anmerkung oben in Schritt 6) Master-Mix in die entsprechenden Vertiefungen. Wechseln Sie bei Verwendung einer Einkanalpipette jedes Mal die Spitze. Wenn Sie eine Dispenserpipette verwenden, achten Sie darauf, dass von Vertiefung zu Vertiefung nichts verspritzt wird. Halten Sie die Platte auf Eis.
- 23. Fügen Sie in die entsprechenden Vertiefungen 2,0 µL (siehe Anmerkung oben in Schritt 6) der Probenmatrizen-DNAs oder Wasser (No Template Control, NTC) hinzu. Verwenden Sie Pipettenspitzen für jede Probe und vermeiden Sie die Kreuzkontamination durch Verspritzen. Verschließen Sie die Vertiefungen mit den Proben-DNAs und dem NTC mit

dem 8-Verschlussstreifen (bei Verwendung einer 96-Loch-Mikrotiterplatte) bzw. die 0,2-mL-PCR-Reaktionsgefäße mit ihren Deckeln. Vergewissern Sie sich, dass die Deckel fest verschlossen sind.

24. Öffnen Sie erst jetzt die Röhrchen mit den Kontrollmatrizen-DNAs (PNs 710131, 710135, 710136, 710137, 710138) – und zwar eines nach dem anderen. Pipettieren Sie diese Kontrollmatrizen zuletzt, um das Risiko einer Kontamination der Proben-DNA zu verringern. Verschließen Sie jede Vertiefung wieder mit den 8-Verschluss-Streifen (wenn Sie eine 96-Loch-Mikrotiterplatte verwenden) bzw. schließen die 0,2-mL-PCR-Reaktionsgefäße mit dem Deckel. Vergewissern Sie sich, dass die Deckel fest verschlossen sind.

ANMERKUNG: Zur guten Laborpraxis gehört, die No Template Controls (NTC) in Vertiefungen zu geben, die nicht an Positive Controls oder Proben angrenzen.

ANMERKUNG: Als Vorschlag, wie 96-Loch-Mikrotiterplatte für die Analyse von *KRAS* und *NRAS* Exon 2-4 anzulegen ist, siehe **Anhang A.1 Plattenlayout für SURVEYOR Scan Kits**.

25. Vortexen Sie (~1/2 Geschwindigkeit) 10 Sekunden lang.
26. Zentrifugieren Sie 1-2 Minuten lang, um zu garantieren, dass alle Lösungen auf dem Boden der Vertiefung oder der Röhrchen gesammelt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Lösungen auf dem Boden jeder Vertiefung bzw. jeden Reaktionsgefäßes sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie die Zentrifugation.

12.6 Thermocycler-Programm für Amplifikationsprotokoll

1. Verwenden Sie folgendes Thermocycler-Protokoll für die PCR-Amplifikation und Heteroduplex-Bildung:

Initiale Denaturierung		
	95 °C	5 Minuten
Touchdown-Amplifikation		
15 Zyklen	95 °C	30 Sekunden
	62 °C, -0,5 °C/Zyklus	30 Sekunden
	72 °C	25 Sekunden
Amplifikation		
30 Zyklen	95 °C	30 Sekunden
	55 °C	30 Sekunden
	72 °C	25 Sekunden
Finale Extension		
1 Zyklus	72 °C	2 Minuten
Heteroduplex-Bildung		
	95 °C	2 Minuten
	≤12 °C	Hold

12.7 Qualitätskontrolle der PCR-Produkte

1. Bevor Sie mit dem SURVEYOR Nuclease Verdau fortfahren, müssen Qualität und Quantität des Amplikons durch Gel-Elektrophorese (oder äquivalente Mittel) geprüft werden.
2. Analysieren Sie ein Aliquot des PCR-Produkts zusammen mit mehreren verschiedenen Mengen einer 100-bp DNA-Basenpaarleiter.
3. Verwenden Sie die Basenpaarleiter, um die Konzentration amplifizierter DNA zu berechnen.
4. Es sollte nur eine einzige, dem Haupt-PCR-Produkt entsprechende Bande größer als 20 ng/μL verzeichnet werden.

5. Falls mehrere Bande vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass die Qualität der Eingangsmatrizen-DNA ausreichend war (siehe **Anhang B – Fehlersuche**).
6. Falls kein Produkt zu sehen ist, vergewissern Sie sich, dass die Qualität der Eingangsmatrizen-DNA ausreichend war (siehe **Anhang B – Fehlersuche**). Wenn die Qualität den Spezifikationen entspricht, erhöhen Sie das Volumen der Matrize auf 4,0 µL je 50 µL Reaktion (Verhältnis von Wasser zu Reaktion auf 31,0 µL reduzieren).
7. In der No Template Control dürfen keine PCR-Produkte zu sehen sein. Wenn bei dieser Kontrolle DNA-Produkte nachweisbar sind, liegt wahrscheinlich eine Kontamination vor (siehe **Anhang B – Fehlersuche**).
8. Bewerten Sie die PCR als „starke“ PCR oder „schwache“ PCR.
 - a. Eine „starke“ PCR muss eine Einzelbande haben, die gleich oder größer als 20 ng/µL ist.
 - b. Eine „schwache“ PCR muss eine Einzelbande haben, die kleiner als 20 ng/µL ist.
 - c. Führen Sie den SURVEYOR Nuclease Verdau sowohl mit "starken" als auch "schwachen" PCR-Ergebnissen durch.



TIPP: In dieser Phase können PCR-Produkte bei unter bzw. gleich -20 °C bis zu einer Woche gelagert werden.

12.8 SURVEYOR Nuclease-Verdau

1. Nachdem sich die Probe-PCR in Qualität und Quantität als ausreichend erwiesen hat, führen Sie die SURVEYOR Nuclease Verdaureaktion wie nachstehend beschrieben durch.
2. Tauen Sie die 0.15 M MgCl₂ Solution und den SURVEYOR Enhancer Cofactor auf Eis auf.
3. Geben Sie 10,0 µL von allen oben genannten PCR-amplifizierten Proben in ein neues 0,2 mL-PCR-Reaktionsgefäß oder in die Vertiefung einer 96-Loch-Mikrotiterplatte.
4. Bereiten Sie frisch eine Mischung aus 0.15 M MgCl₂ SURVEYOR Enhancer Cofactor, SURVEYOR Enhancer W2 und SURVEYOR Nuclease W (SURVEYOR Nuclease-Reaktionsgemisch) zu.

Bereiten Sie den SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix für die Analyse mehrerer Proben anhand der folgenden Tabelle vor. Das Beispiel unten zeigt die Volumina für ein 10-Proben-Master Mix.

Berücksichtigen Sie, dass etwas mehr Master-Mix, als in dieser Berechnung angezeigt, benötigt wird, um Verluste während des Pipettierens auszugleichen.

Anzahl der SURVEYOR Nuclease-Verdaureaktionen:	10
Volumenberechnung:	
0.15 M MgCl ₂ Solution (µL)	10,0
SURVEYOR Enhancer Cofactor (µL)	10,0
SURVEYOR Enhancer W2 (µL)	10,0
SURVEYOR Nuclease W (µL)	20,0
Master-Mix-Gesamtvolumen	50,0
Fügen Sie je 5 µL SURVEYOR Nuclease Master-Mix den einzelnen PCR-amplifizierten Proben hinzu (µL).	10,0
Gesamtvolumen SURVEYOR Nuclease-Verdaureaktion:	15,0

- a. Vor dem Gebrauch jedes Reagenz zentrifugieren.
- b. Vor dem Pipettieren jedes Reagenz leicht vortexen. Zentrifugieren Sie nach jedem Vortexschritt ~10 Sekunden leicht an.

- c. Fügen Sie für jeden Verdau einem 0,2-mL- (oder größeren) PCR-Reaktionsgefäß folgende Komponenten hinzu.

1,0 µL 0.15 M MgCl₂ Solution (PN 708027)
 1,0 µL SURVEYOR Enhancer Cofactor (PN 708049)
 1,0 µL SURVEYOR Enhancer W2 (PN 710161)
 2,0 µL SURVEYOR Nuclease W (PN 710160)

Oder fügen Sie 5 µL Master-Mix hinzu, der wie in der Tabelle oben vorbereitet wurde.

5. Vortexen Sie den SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix 10 Sekunden bei niedriger Geschwindigkeit.
6. Zentrifugieren Sie den SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix 10 Sekunden bei niedriger Geschwindigkeit.
7. Legen Sie den SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix bis zur Weiterverarbeitung auf Eis.

Anmerkung: Der in Schritt 7 vorbereitete SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix muss sofort verwendet werden, da SURVEYOR Nuclease W mit der Zeit inaktiv wird, wenn sie mit den anderen Komponenten des SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix in Berührung kommt.

8. Pipettieren Sie je 5,0 µL Aliquot des SURVEYOR Nuclease Master Mix in jedes Reaktionsgefäß oder jede Vertiefung, das bzw. die 10,0 µL Aliquot des amplifizierten PCR-Produkts enthält (siehe Schritt 3 oben).
9. Wenn Sie mit dem Pipettieren fertig sind, zentrifugieren Sie die 0,2-mL-PCR-Reaktionsgefäße bzw. die 96-Loch-Mikrotiterplatte 10 Sekunden lang.
10. Vortexen Sie die 0,2-mL-PCR-Reaktionsgefäße bzw. die 96-Loch-Mikrotiterplatte vorsichtig 10 Sekunden lang.
11. Zentrifugieren Sie 10 Sekunden bei niedriger Geschwindigkeit (dieser Schritt ist besonders wichtig, wenn der Verdau in einem Instrument ohne beheizten Deckel durchgeführt wird).
12. Inkubieren Sie 30 Minuten lang bei 42 °C.
13. Fügen Sie jedem Röhrchen bzw. jeder Vertiefung 1,0 µL SURVEYOR Stop Solution (PN 708030) hinzu, leicht vortexen (SURVEYOR Nuclease Gesamtreaktionsvolumen beträgt 16,0 µL).



TIPP: Die SURVEYOR-Verdauprodukte können bei ≤ -20 °C bis zu einer Woche gelagert werden.

14. Laden Sie die Probenverdaus auf das DHPLC-System.

Anmerkung: Empfohlene Gradienteneinstellungen für die Analyse von SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukte mit dem DHPLC-System, gehen Sie auf <http://world.Transgenomic.com/diagnostic-tools/genetic-analysis-kits/crc-rascan-kits-eu/DHPLCsystemsettings>.

13 Kontrollverfahren

13.1 Qualitätskontrolle für das SURVEYOR Scan *NRAS* Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD

Zur Qualitätskontrolle bestimmter Schritte des Testverfahrens sind diesem Kit Kontrollplasmid-DNAs beigelegt. Für das **Amplifikationsprotokoll** gewährleisten diese Kontrollen, dass der Master-Mix korrekt hergestellt wurde und die Amplifikation richtig funktioniert hat. No Template Controls (wo anstelle der Matrizen-DNA Wasser hinzugefügt wird) werden ebenfalls empfohlen, um eine mögliche Kontamination der Kitkomponenten mit einer DNA-Matrize nachzuweisen.

Bei dem Schritt des SURVEYOR Nuclease-Verdau zeigen die Amplikons dieser drei Kontrollplasmid-DNAs effektiv, ob die Bedingungen der Spaltreaktion (Herstellung des SURVEYOR Nuclease Digest Master Mix und Inkubationsbedingungen) zufriedenstellend waren. Bei der Analyse liefern die Chromatogramme dieser SURVEYOR Nuclease verdauten Kontrollamplikons auf dem DHPLC-System einen Hinweis darauf, wo die Peaks der Spaltprodukte, die den Mutationen in *NRAS* Exon 2, 3 und 4 entsprechen, sogar bei geringer Konzentration, eluieren werden (siehe **Abbildung 4-6**). Peaks von Spaltprodukten, die anderen Mutationen in *NRAS* Exons 2, 3 und 4 entsprechen, können in leicht unterschiedlichen Positionen eluieren.

Wenn die PCR-Amplikons nicht den Ergebnissen in **Abschnitt Qualitätskontrolle der PCR-Produkte** entsprechen, sehen Sie in **Anhang B - Fehlersuche** nach, oder setzen Sie sich mit dem Kundendienst von Transgenomic in Verbindung, bevor Sie weitere Schritte der Probenanalyse durchführen.

13.2 Verwendung von Kontrollplasmid-DNAs

Mit dem Kit werden vier Kontroll-DNAs geliefert:

NRAS Control Wild-Type; PN 710441

NRAS Positive Control Exon 2; PN 710442

NRAS Positive Control Exon 3; PN 710443

NRAS Positive Control Exon 4; PN 710444

Diese Kontroll-DNAs sind Plasmide mit Insertionen. Die Positive Controls enthalten jeweils zwei Plasmide: eine Mischung aus *NRAS* Control Wild-Type und einem Mutationsklon, der sich vom Wild-Type in einem einzigen Basenpaar unterscheidet. Die Kontrollen werden in getrennten Reagenzgefäßen geliefert, jede mit einer Konzentration von 10^5 Kopien/ μ L.

Die für die PCR-Amplifikation benötigten *NRAS* Exons 2, 3 und 4 Forward und Reverse PCR Primer für werden getrennt im Kit geliefert. Bitte befolgen Sie beim Gebrauch dieser Kontrollen mit der **SURVEYOR Nuclease** die Anleitungen in **Amplifikationsprotokoll**, **SURVEYOR Nuclease-Verdau und Analyse von *NRAS* Exon 2, 3 & 4**.

ES WIRD PERSONEN, DIE DIESEN TEST ERSTMALS AUSFÜHREN, DRINGEND EMPFOHLEN, ZUNÄCHST TESTS MIT KONTROLLEN DURCHZUFÜHREN, BEVOR SIE GENOMISCHE PROBEN BEARBEITEN.

14 Interpretation der Ergebnisse

14.1 Analyse von *NRAS* Exons 2, 3 & 4 mit SURVEYOR Nuclease

Führen Sie zu Vergleichs- und Kontrollzwecken bei allen Kontrollen (Wild-Type und Positive Controls), einer No Template Control sowie bei den Proben-DNAs **IMMER** den SURVEYOR Nuclease Verdau durch und lassen sie auf derselben Probenplatte auf dem DHPLC-System durchlaufen.

Bei der Phase des SURVEYOR Nuclease Verdau überprüfen die Amplikons dieser Kontrollplasmid-DNAs effektiv, ob die Bedingungen der Spaltreaktion (Herstellung der SURVEYOR Nuclease Mixtur und Inkubationsbedingungen) zufriedenstellend waren. Bei der Analyse liefert das DHPLC-System Spuren dieser verdauten Kontrollamplikons der SURVEYOR Nuclease einen Anhaltspunkt, wo die DNA-Fragmente aus der Spaltung an diesen spezifischen Mutations-Mismatch-Stellen, auch bei geringer Konzentration, eluiert werden (siehe **Abbildung 4-6**).

Wenn entweder die PCR-Amplikons oder die aus den Kontroll-DNAs stammenden SURVEYOR Nuclease Spaltfragmente nicht den dargestellten Ergebnissen entsprechen, sehen Sie im **Anhang B – Fehlersuche** nach oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Transgenomic, bevor Sie weitere Schritte der Probenanalyse durchführen.

Die Beispiele unten dienen nur zu Darstellungszwecken und dürfen **NICHT** verwendet werden, um die Identität einer gegebenen Mutation festzulegen. Die Bestätigung der Identität einer Mutation ist erforderlich, um eindeutig die Präsenz einer spezifischen Basenänderung in Exon 2, 3 oder 4 des *NRAS*-Gens zu bestimmen.

SURVEYOR Nuclease spaltet an allen Mismatches, die sich aus der Heteroduplex-Bildung von Wild-Type und mutanten DNAs ergeben – nicht nur Mutationen in Exon 2, 3 oder 4. Die SURVEYOR Nuclease bestätigt, dass ein Mismatch vorhanden ist. Die mutationsspezifische Identität der Basenänderung ist zur Bestimmung des *NRAS*-Aktivierungsstatus erforderlich, und muss durch eine andere Methode (z. B. Sequenzierung) bestätigt werden.

14.2 Datenprüfung der SURVEYOR Scan-Ergebnisse

Überprüfen Sie die Chromatogramme und vergleichen die von Wild-Type und Positive Controls mit denen der Probe. Bestimmen Sie, ob das Chromatogramm der Probe mit dem Wild-Type-Muster übereinstimmt oder differiert. Wenn es sich unterscheidet, dann sollte die Probe als "SURVEYOR Scan positiv" bewertet und zur DNA-Sequenzanalyse geschickt werden. Siehe Beispiele in **Abbildung 4-6** sowie **Anhang B – Fehlersuche, Probleme 7 & 8** für Beispiele solcher Proben.

Jede Probe mit einem SURVEYOR Nuclease-Muster, dass sich von dem des Wild-Type unterscheidet, sollte für eine Sequenzbestätigung eingeschickt werden, selbst wenn sie nicht mit der Positive Control identisch ist. Siehe **Anhang B – Fehlersuche, Problem 7** für ein Beispiel einer solchen Probe.

Falls erforderlich, zoomen Sie auf den Bildausschnitt und überblenden das Chromatogramm mit der Wild-Type Control für dieses Amplikon.

Dokumentieren Sie alle Unterschiede zwischen der Wild-Type Control und der analysierten Probe.

Wichtig! Für eine sorgfältige Prüfung jeder Probe sollte der Prüfer kontrollieren, ob nebeneinanderliegende Proben in der Analyseplatte identische positive SURVEYOR Scan Ergebnisse ausweisen. Das Auftreten identischer positiver Ergebnisse kann das Resultat einer Kreuzkontamination von Probe und Kontrolle sein. Die Analyse muss in dem Fall wiederholt werden.

14.3 Beispielergebnisse

Beispielergebnisse, die mit dem SURVEYOR Scan NRAS Kit Exon 2, 3 & 4 CE IVD für DHPLC erzielt wurden, zeigen die **Abbildung 4-6** unten. In diesen Beispielen wurde unter Verwendung des WAVE® 4500 Systems mit UV- als auch Fluoreszenz-Detektoren das im Abschnitt **Schritt-für-Schritt-Anleitung** dargestellt Verfahren genauestens eingehalten. Für Hinweise zu empfohlenen Gradienteneinstellungen für die Analyse von SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukten mit dem DHPLC-System, gehen Sie auf <http://world.Transgenomic.com/diagnostic-tools/genetic-analysis-kits/crc-rascan-kits-eu/DHPLCsystemsettings>.

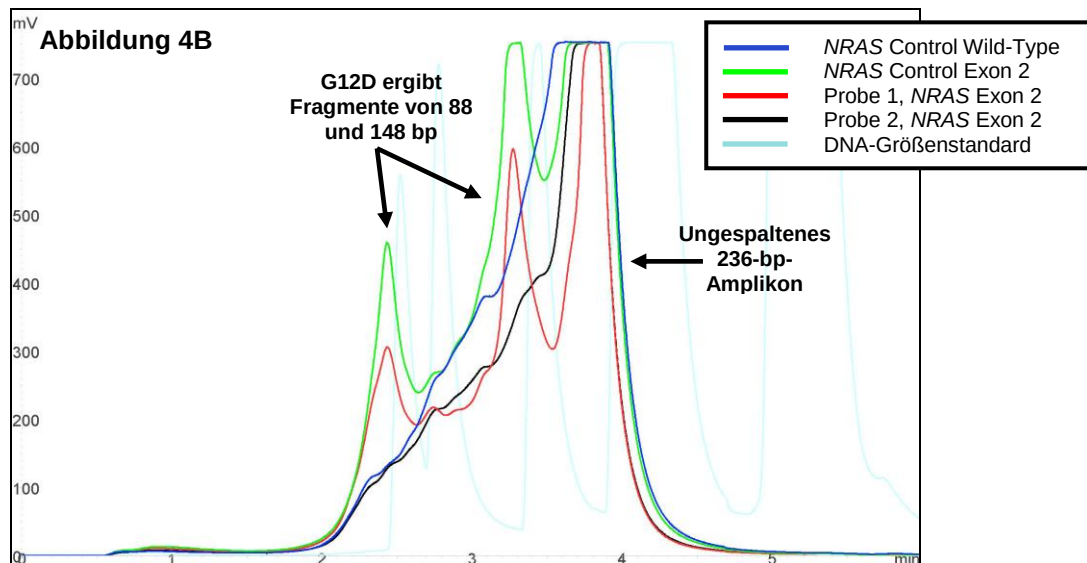
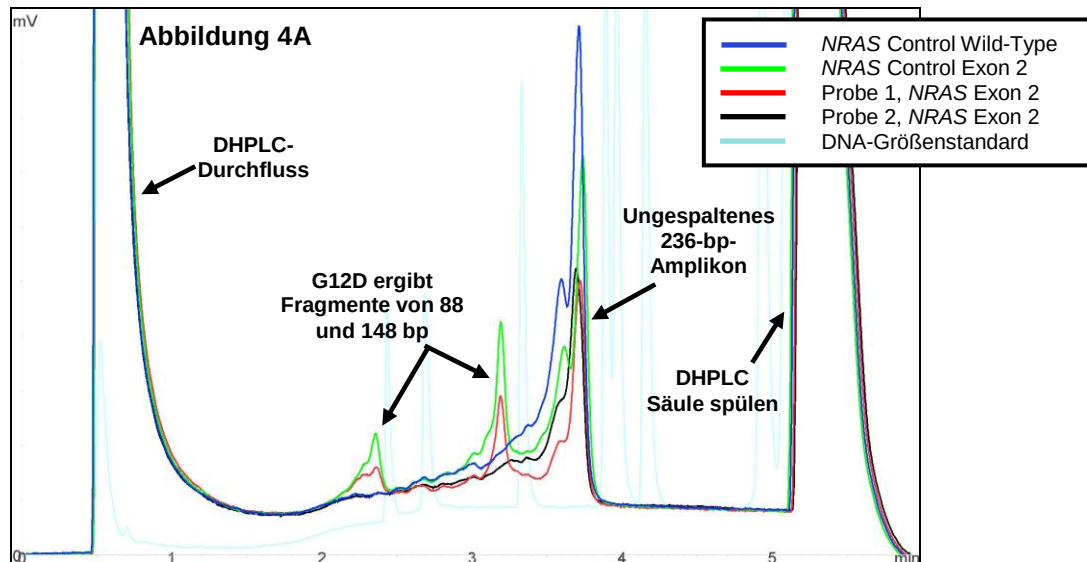


Abbildung 4A und 4B: WAVE DHPLC Analyse mit UV- (Abbildung 4A) und Fluoreszenz- (Abbildung 4B) Nachweis von SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukten von NRAS Positive Control Exon 3, Wild-Type Controls und CRC-DNA isoliert aus FFPE-Schnitten. Bei der Sichtprüfung der Chromatogramme sollten die verdauten Proben mit der NRAS Control Wild-Type (blaue Linie) verglichen werden. Die NRAS Positive Control Exon 2 (grüne Linie) ist eine Mischung aus Wild-Type- und mutanten G12D-Plasmiden, die in Verdauungspeaks zu 88 und 148 bp resultieren; diese Kontrolle weist darauf hin, dass der SURVEYOR Nuclease Verdauschritt funktioniert hat, und weist auf dem Chromatogramm auf die Region zur Sichtprüfung hin, die bestimmt, ob eine Probe zur DNA-Sequenzanalyse geschickt werden sollte. Beim Vergleich der Verdauungsmuster der Proben 1 und 2 mit dem Wild-Type-verdauten Elektropherogramm ist es offensichtlich, dass Probe 1 (rot Linie) möglicherweise eine Mutation enthält und sequenziert werden sollte, um Anwesenheit oder Fehlen einer Mutation am entsprechenden Codon zu bestätigen. Die Probe 2 (schwarze Linie) hat im Vergleich zur NRAS Control Wild-Type ein

ähnliches Chromatogramm und muss nicht zur DNA-Sequenzanalyse geschickt werden. Bitte beachten Sie, dass das Sequenzierungsergebnis das endgültige Ergebnis darstellt, da es in derselben Fragmentgröße weitere nicht relevante Mutationen geben kann.

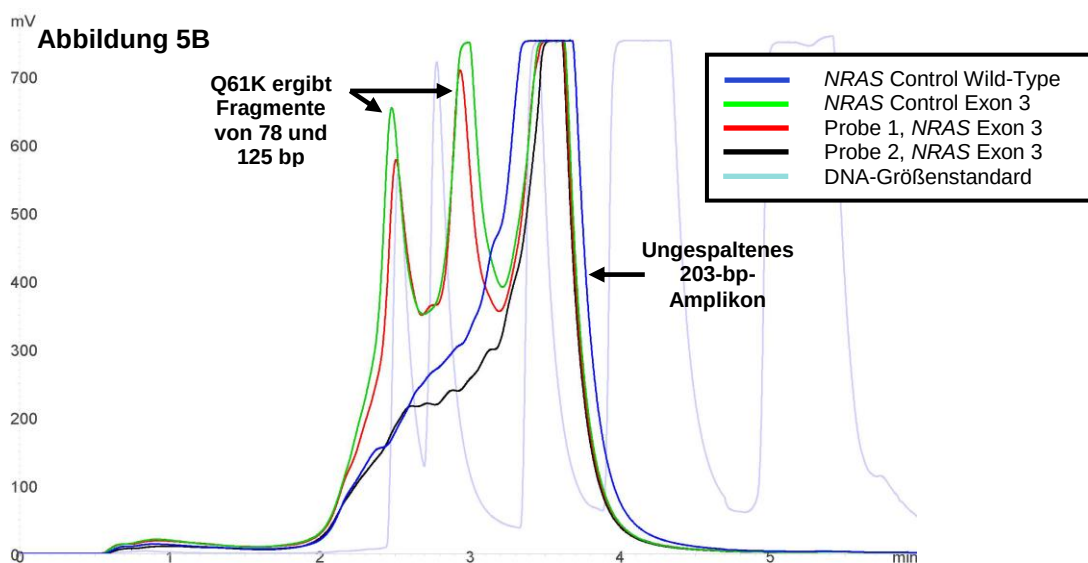
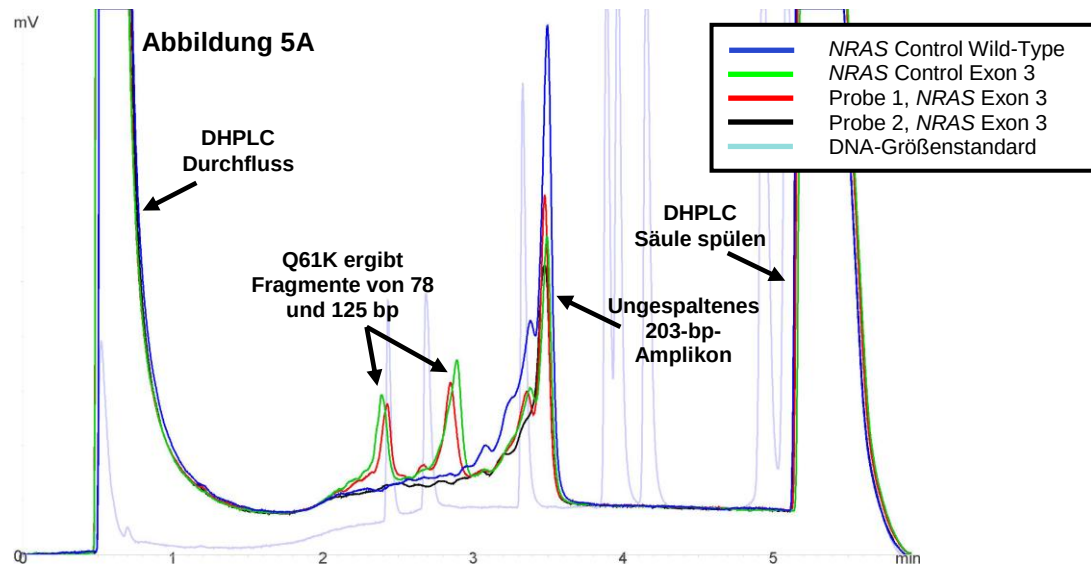


Abbildung 5A und 5B: WAVE DHPLC Analyse mit UV- (Abbildung 5A) und Fluoreszenz- (Abbildung 5B) Nachweis von SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukten NRAS Positive Control Exon 3, Wild-Type Controls und CRC-DNA isoliert aus FFPE-Schnitten. Bei der Sichtprüfung der Chromatogramme sollten die verdauten Proben mit der NRAS Control Wild-Type (grüne Linie) verglichen werden. Die NRAS Positive Control Exon 3 (blaue Linie) ist eine Mischung aus Wild-Type- und mutanten Q61K-Plasmiden, die in Verdauungsspeaks zu 78 und 125 bp resultieren; diese Kontrolle weist darauf hin, dass der SURVEYOR Nuclease Verdauungsschritt funktioniert und gibt auf dem Chromatogramm die Region zur Sichtprüfung an, mit der bestimmt werden sollte, ob eine Probe zur DNA-Sequenzanalyse geschickt werden sollte. Beim Vergleich der Verdauungsmuster der Proben 1 und 2 mit dem Wild-Type, das im Elektropherogramm verdaut ist, ist es offensichtlich, dass Probe 1 (rot Linie) möglicherweise eine Mutation enthält und sequenziert werden sollten, um die Anwesenheit oder das Fehlen einer Mutation am entsprechenden Codon zu bestätigen. Die Probe 2 (schwarze Linie) hat im Vergleich zur NRAS Control Wild-Type ein ähnliches Chromatogramm und muss nicht zur DNA-Sequenzanalyse geschickt werden. Bitte beachten, dass das Sequenzierungsergebnis das endgültige Ergebnis darstellt, da es in derselben Fragmentgröße weitere nicht relevante Mutationen geben kann.

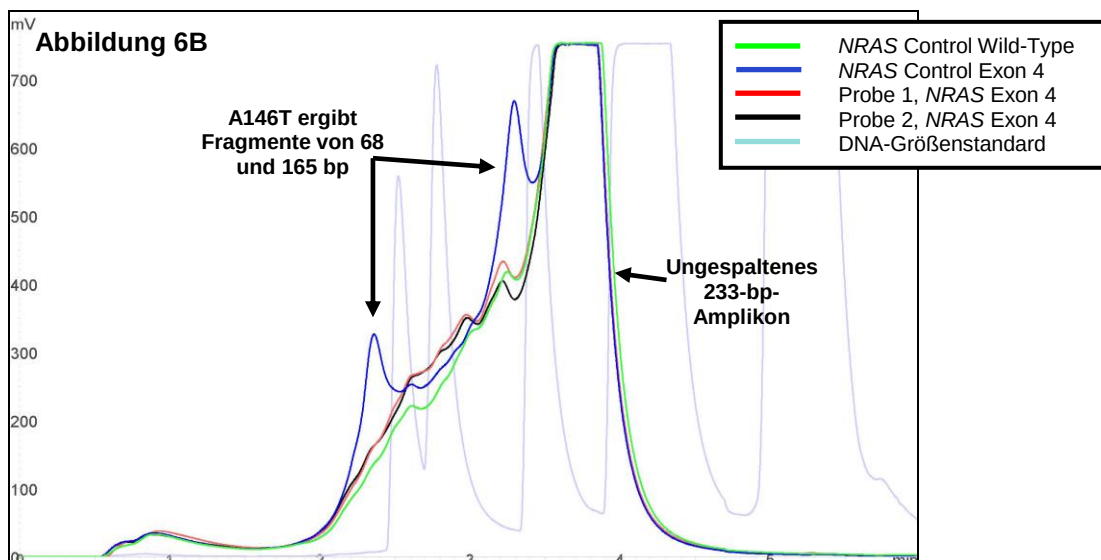
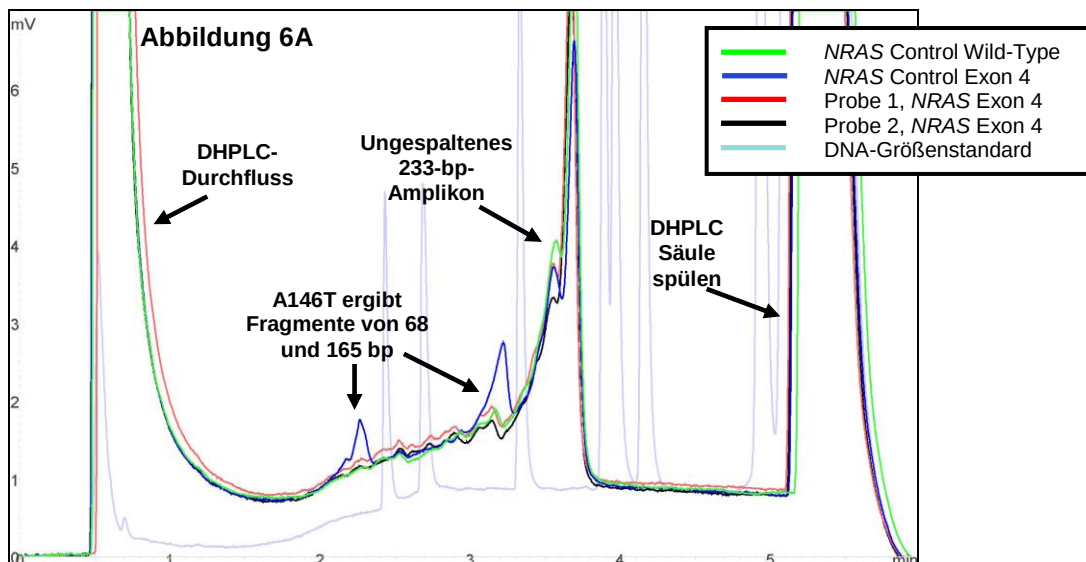


Abbildung 6A und 6B: WAVE DHPLC Analyse mit UV- (Abbildung 6A) und Fluoreszenz- (Abbildung 6B) Nachweis von SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukten NRAS Positive Control Exon 4, Wild-Type Controls und CRC-DNA isoliert aus FFPE-Schnitten. Bei der Sichtprüfung der Chromatogramme sollten die verdauten Proben mit der NRAS Control Wild-Type (grüne Linie) verglichen werden. Die NRAS Positive Control Exon 4 (blaue Linie) ist eine Mischung aus Wild-Type- und mutanten A146T-Plasmiden, die in Verdauungspeaks zu 68 und 165 bp resultieren; diese Kontrolle weist darauf hin, dass der SURVEYOR Nuclease Verdauungsschritt funktioniert und gibt auf dem Chromatogramm die Region zur Sichtprüfung an, mit der bestimmt werden sollte, ob eine Probe zur DNA-Sequenzanalyse geschickt werden sollte. Beim Vergleich der Verdauungsmuster der Proben 1 und 2 mit dem Wild-Type-verdauten Elektropherogramm ist es offensichtlich, dass Proben 1 und 2 (rot und schwarze Linie) ähnliche Chromatogramme wie für die NRAS Control Wild-Type zeigen und nicht zur DNA-Sequenzanalyse eingeschickt werden müssen. Bitte beachten, dass für positive Ergebnisse mit dem SURVEYOR Scan das Sequenzierungsergebnis das endgültige Ergebnis darstellt, da es in derselben Fragmentgröße weitere nicht relevante Mutationen geben kann.

15 Leistungsmerkmale

15.1 Nachweisgrenze von Mutationen mit SURVEYOR Scan-Kits

Die Validierung der SURVEYOR Scan Kits für DHPLC-Plattformen mit Plasmidklonen aller angezeigten Mutationen hat gezeigt, dass SURVEYOR Nuclease-Peaks in einer Mischung von 2–5% Mutant vor einem Wild-Type-Hintergrund nachgewiesen werden können.

Der automatischen Sequenzierungszuordnung der Vorwärts- und auch Rückwärtsstränge gelingt es häufig nicht, Mutationen mit Werten unter 10% in Gemischen mit Wild-Type-DNA zu erfassen. Zusammen mit den SURVEYOR Nuclease-Ergebnissen ist es möglich, die 5–10% mutanten Sequenzierungselektropherogramme mit mehr Sicherheit zu interpretieren.

Wenn eine Probenanalyse ein positives SURVEYOR Scan-Ergebnis zeigt, aber mit der DNA-Sequenzierung keine KRAS- oder NRAS-Mutation detektiert wird, empfehlen wir, dass „Keine Variante erfasst“ als Ergebnis angegeben wird. Für weitere Einzelheiten siehe Überlegungen zum Arbeitsablauf.

15.2. Sequenzbestätigung

Für alle SURVEYOR Scan positiven Ergebnisse mit der Sequenzbestätigung fortfahren, um die Sequenzidentität der NRAS Exon 2, 3 oder 4 Mutationen zu bestimmen.

Bei einem negativen Ergebnis des SURVEYOR Scans keine Sequenzbestätigung durchführen. Die Probe kann als Wild-Type oder "Keine Variante festgestellt" (No Variant Detected) angegeben werden.

Die in diesem Kit enthaltenen Universal Sequencing Primers sollten zur Sequenzbestätigung verwendet werden. Der Vorwärts-Primer hat die PN 710153F (Universal Sequencing Primer 1), der Rückwärts-Primer die PN 710153R (Universal Sequencing Primer 2).

15.3 Verfahrensbeschränkungen

Von der Extraktion der formalinfixierten, paraffineingebetteten Proben übertragene kontaminierende Stoffe können ebenfalls PCR-Amplifikation und SURVEYOR Nuclease-Verdauungsvorgänge stören. Die in **Verfahren zur Qualitätskontrolle** beschriebenen Vorgehensweisen zur Qualitätskontrolle gewährleisten, dass die extrahierte DNA zur Verwendung mit diesem Kit geeignet ist.

Dieses Kit wurde für die Verwendung mit formalinfixierten, paraffineingebetteten Biopsieproben von Kolorektaltumoren validiert. Eine Validierung für eine Verwendung mit anderen Krebsarten oder frischen bzw. tiefgefrorenen Biopsieproben besteht nicht.

Zur Fehlersuche nicht standardmäßiger Ergebnisse und Einzelheiten zu Faktoren, die diesen Test beeinträchtigen können, siehe **Anhang B – Fehlersuche** weiter unten.

Bei diesem Kit muss besonders darauf geachtet werden, Übertragung und Kreuzkontamination zu vermeiden. Die hohe Empfindlichkeit der Testmethode erfordert Vorsichtsmaßnahmen für folgende Punkte:

- Achten Sie darauf, dass alle Proben so gehandhabt werden, dass eine Kreuzkontamination zwischen ihnen nicht vorkommt.
- Arbeiten Sie an einem PCR-Arbeitsplatz oder in einem anderen geeigneten Raum, wo der Arbeitsbereich vor dem Aufbau von PCR-Amplifikationsreaktionen UV-Licht ausgesetzt werden kann.
- Verwenden Sie einen getrennten PCR-Arbeitsplatz bzw. Raum, um die Proben nach der PCR-Amplifikation für die Qualitätskontrolle durch Gelelektrophorese zu öffnen.
- Der Testaufbau für die SURVEYOR Nuclease-Verdauung sollte in einem anderen Raum oder an einem anderen PCR-Arbeitsplatz von dem stattfinden, wo die erste PCR durchgeführt wurde.
- Achten Sie darauf, dass bei allen Testschritten die Plasmidkontrollen des Kits von den Testproben getrennt gehandhabt werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Lösungen, No Template Controls und Proben-DNA-Vertiefungen verschlossen sind, bevor Sie die Reaktionsgefäße mit der Kontrollplasmid-DNA öffnen.
- **DIE KONTROLLEN ZULETZT BEARBEITEN.** Fügen Sie den entsprechenden Reaktionsgefäßen erst dann Kontrollplasmid-DNA hinzu, NACHDEM ALLE Vertiefungen mit No Template Control und Proben verschlossen wurden.
- Wischen Sie ALLE Röhrchen und Verschlusskappen nach dem Verschließen der Kontroll-DNA-Röhrchen mit einem DNA-Zerstörungsmittel ab (z. B. 10 % Bleiche), bevor Sie sie in einen anderen Bereich bringen.
- Achten Sie darauf, dass es beim Pipettieren in die 96-Loch-Mikrotiterplatte (beispielsweise durch Verspritzen während des Mischens oder durch nicht gewechselte Pipettenspitzen) nicht zu einer Kontamination der Proben in den angrenzenden Vertiefungen kommt.

Anhang A

A.1 Plattenlayout für SURVEYOR Scan Kits

Das vorgeschlagene Plattenlayout gilt für die gleichzeitige Durchführung aller sieben *KRAS* und *NRAS* Exons mit der SURVEYOR Scan Analyse an 10 Proben.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A: KRAS Ex 2	KRAS Ex 2 WT	KRAS Ex 2 Mut	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Probe 6	Probe 7	Probe 8	Probe 9	Probe 10
B: KRAS Ex 3	KRAS Ex 3 WT	KRAS Ex 3 Mut										
C: KRAS Ex 4A	KRAS Ex 4A WT	KRAS Ex 4A Mut										
D: KRAS Ex 4B	KRAS Ex 4B WT	KRAS Ex 4B Mut										
E: NRAS Ex 2	NRAS Ex 2 WT	NRAS Ex 2 Mut										
F: NRAS Ex 3	NRAS Ex 3 WT	NRAS Ex 3 Mut										
G: NRAS Ex 4	NRAS Ex 4 WT	NRAS Ex 4 Mut	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
H:	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	NTC KRAS Ex 2	NTC KRAS Ex 3	NTC KRAS Ex 4A	NTC KRAS Ex 4B	NTC NRAS Ex 2	NTC NRAS Ex 3	NTC NRAS Ex 4

Schlüssel: Ex = Exon; WT = Wild-Type; Mut = Mutation; NTC = No Template Control.

A.2 Kontroll-DNA-Stempel

Im Folgenden werden die Sequenzen mit einem "Stempel" angegeben.

Schlüssel: Die häufigsten Mutationsregionen sind **Violett** markiert. Die Sequenz in GROSSBUCHSTABEN stellen codierende Basen dar; die Sequenz in Kleinbuchstaben stellen nicht-codierende Basen dar.

Die Kontrollen haben genetische "Stempel", die **Gelb** markiert sind; diese Variationen von der *NRAS*-Wild-Type-Sequenz, in einem Bereich, in dem keine Mutationen erwartet werden, können verwendet werden, um Probleme mit der Probenkontamination durch Positive Controls zu erkennen. Siehe **Anhang B - Fehlersuche, Problem 8**, für ein Beispiel einer SURVEYOR Scan-Spur einer solchen Kontamination.

NRAS Exon 2 "Stempel"

Amplikongröße: 236 bp. Für die Herstellung des genetischen Stempels des *NRAS* Exon 2 Kontrollplasmids wird *aca* gegen *tgt* ausgetauscht. Codon 12 und 13 sind unten ebenfalls markiert.

cca**tgt**gggtcttctgctggtgtgaaATGACTGAGTACAAACTGGTGGTGGTGGAGCA**GGTGGT**GTT

NRAS Exon 3 "Stempel"

Amplikongröße: 203 bp. Für die Herstellung des genetischen Stempels des *NRAS* Exon 3 Kontrollplasmids wird *GAC* gegen *CTG* ausgetauscht. Codon 59 und 61 sind unten ebenfalls markiert.

ACAGCTGGAC**CAAG**GAAGAGTACAGTGCCATGAGAC**CTG**CAA

NRAS Exon 4 "Stempel"

Amplikongröße: 233 bp. Für die Herstellung des genetischen Stempels des *NRAS* Exon 4 Kontrollplasmids wird *CAAC* gegen *GTT* ausgetauscht. Codon 117 und 146 sind unten ebenfalls markiert.

AACAAGTGTGATTG**CCCAACA**AGGACAGTTGATACAAA**GTT**GCCACGAAGTGGCCAAGAGTTACGGGATTCCATTCA**TTGAAACCTCAGCC**AAG

A.3 HPLC (DHPLC) Systemanforderungen für die Denaturierung

A.3.1 DHPLC Spezifikationen für SURVEYOR Scan Anwendungen

Die folgenden Spezifikationen stellen die Mindestanforderungen für die DHPLC-Systemspezifikationen für die Durchführung der Tests mit dem SURVEYOR Scan *KRAS* & *NRAS* Kit dar.

Abgabesystem für Hochleistungslösungsmittelgradienten

- Binäre Gradientenkapazität; Hochdruck oder Niederdruck
- Durchflussregulierung, Mindestbereich: 0,7 – 1,6 mL/min
- Durchflussgenauigkeit: $\pm 2\%$ (H_2O bei 20 °C)
- Lösungsmittelentgaser

Auto-Sampler

- Temperaturregulierung zum Abkühlen der Platten, einstellbar: 4 bis 14 °C
- Injektionsvolumen: 5–50 μ L

Trennkartusche

- Entwickelt für die Größentrennung von dsDNA-Fragmenten, Fragmentgröße 50 bp bis 250 bp

Säulenofen mit hoch präziser Temperaturregelung

- Temperaturbereich: 40 bis 70 °C
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,2$ °C
- Temperaturreproduzierbarkeit: $\pm 0,2$ °C
- Linearität über vollständigen Temperaturbereich: $\pm 2,0$ °C

Alternative Nachweismethode 1

- **UV/VIS-Detektor**
 - Wellenlängenbereich 190 – 700 nm
 - UV-Quelle: Deuteriumlampe

Alternative Nachweismethode 2

- **Fluoreszenz-Detektor**
 - Wellenlängenbereich: Anregung: 200 – 850 nm; Emission: 250 – 900 nm
 - Fluoreszenzquelle: 150 Xenonlampe
- **Pumpe für Fluoreszenzfarbstoff**
 - Feste Durchflussrate bei 0,1 mL/min – 20%/+50%
 - Pulsationsarmer Durchfluss

A.3.2 Systembetrieb

Zu Installation und Betrieb des DHPLC-Systems richten Sie sich nach den Empfehlungen des Herstellers zur Analyse von dsDNA-Fragmenten in der Größenordnung von 50 bp bis 250 bp mit einer Zielauflösung von mindestens 10 bp. Dies ist der Größenbereich für Fragmente nach SURVEYOR Nuclease-Verdau mit diesem Kit.

Für Hinweise zu empfohlenen Gradienteneinstellungen für die Analyse von SURVEYOR Nuclease-Verdauprodukten mit dem DHPLC-System, gehen Sie auf <http://world.Transgenomic.com/diagnostic-tools/genetic-analysis-kits/crc-rascan-kits-eu/DHPLCsystemsettings>.

A.3.3 Wartung der DHPLC Kartuschen

Für die Wartung der DHPLC-Kartuschen befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers.

Anmerkung: Die Analyse von SURVEYOR Nuclease-Reaktionen erfordert häufigere und strengere Reinigungsprotokolle als für die normale PCR-Probenanalyse. Für weitere Einzelheiten siehe die Anweisungen Ihres DHPLC-Systems.

A.4 Laborbedingungen für PCR-Tests

Um zuverlässige und kontaminationsfreie PCR-Ergebnisse zu erhalten, halten Sie sich bei der Einrichtung der PCR-Labors an die gute Laborpraxis.

Denken Sie bei der Planung des Laboraufbaus an den Bedarf an räumlicher Trennung der Arbeitsbereiche PCR-Amplifikation und Post-Amplifikation. Es ist wichtig, Folgendes zu trennen: (i) DNA-Isolierung; (ii) PCR-Amplifikation und (iii) Post-PCR-Aktivitäten wie das Öffnen von Röhrchen mit amplifizierter Probe für die Durchführung von Gelelektrophoresen und Vorbereiten anderer Tests wie SURVEYOR Nuclease-Verdau und DNA-Sequenzierung.


Es ist auch wichtig, dass Laborverbrauchsmaterial und Laborausrüstung speziell für diese Arbeitsbereiche gekennzeichnet sind und ausschließlich in diesem Bereich verwendet werden. Abwischen von Oberflächen mit einer wöchentlich frisch zubereiteten Bleiche 10% (v/v) ist hilfreich bei der Elimination von DNA-Fragmenten ≤ 500 bp als Matrizen für PCR. Darüber hinaus kann es nützlich sein, Kunststoffprodukte und Lösungen mit einem UV-Crosslinker 7–10 Minuten kurzweiliger UV-Strahlung auszusetzen.

Anmerkung: Enzyme und DNA, die amplifiziert werden soll, **darf nicht** mit UV-Strahlung behandelt werden.

Zur Reduzierung von Kontamination vorschrittsmäßige Schutzkleidung tragen, häufig Handschuhe wechseln und, bevor man sich zum Arbeitsbereich begibt, die behandschuhten Hände mit 10% (v/v) Bleiche abwischen.

Die Einrichtung sollte zumindest der Zweiraumaufteilung in dem Diagramm unten entsprechen, die speziell für PCR und Analysen mit der SURVEYOR Nuclease entwickelt wurde.

Empfohlene Organisation eines PCR-Labors

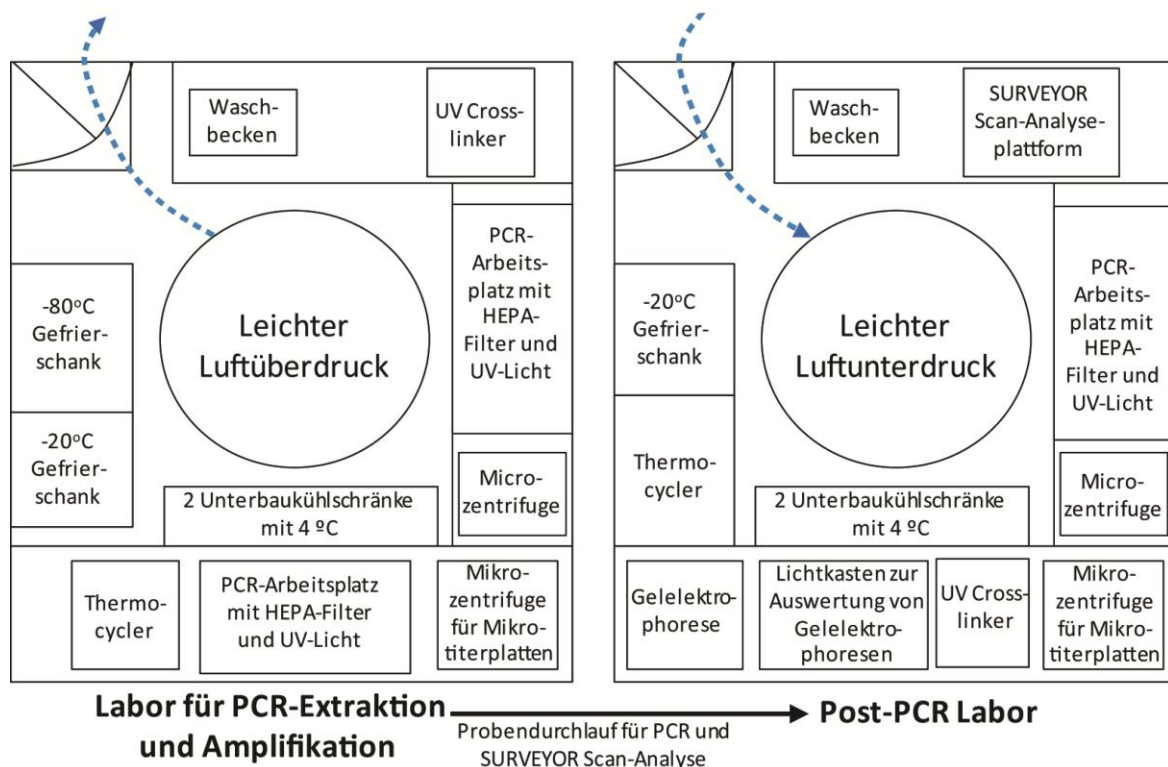

A.5 Literaturnachweis

1. Amgen News Release (2013) New analyses identify predictive biomarkers for Vectibix® (panitumumab) in patients with metastatic colorectal cancer. http://wwwext.amgen.com/media/media_pr_detail.jsp?-year=2013&releaseID=1820728
2. Peeters M *et al* (2013) Massively parallel tumor multigene sequencing to evaluate response to panitumumab in a randomized phase III study of metastatic colorectal cancer. *Clin Cancer Res.* 19 1902-12.
3. De Roock W *et al* (2010) Association of KRAS p.G13D mutation with outcome in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer treated with cetuximab. *JAMA* 304 1812-20.
4. Peeters M *et al* (2013) Mutant KRAS codon 12 and 13 alleles in patients with metastatic colorectal cancer: assessment as prognostic and predictive biomarkers of response to panitumumab. *J Clin Oncol.* 31 759-65.
5. Andre T *et al* (2013) Panitumumab combined with irinotecan for patients with KRAS Wild-Type metastatic colorectal cancer refractory to standard chemotherapy: a GERCOR efficacy, tolerance, and translational molecular study. *Ann Oncol.* 24 412-9.
6. Loupakis F *et al* (2009) KRAS codon 61, 146 and BRAF mutations predict resistance to cetuximab plus irinotecan in KRAS codon 12 and 13 Wild-Type metastatic colorectal cancer. *Br J Cancer* 101 715-21.
7. De Roock W *et al* (2010) Effects of KRAS, BRAF, NRAS, and PIK3CA mutations on the efficacy of cetuximab plus chemotherapy in chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer: a retrospective consortium analysis. *Lancet Oncol.* 11 753-62.
8. Qiu P *et al* (2004) Mutation detection using Surveyor™ nuclease. *Biotechniques* 36 702-707
9. Kuang Y *et al* (2009) Noninvasive detection of EGFR T790M in gefitinib or erlotinib resistant non-small cell lung cancer. *Clin. Cancer Res.* 15 2630-6
10. Mitani N *et al* (2007) Surveyor nuclease-based detection of p53 gene mutations in haematological malignancy. *Ann. Clin. Biochem.* 44 557-9
11. Engelman JA *et al* (2006) Allelic dilution obscures detection of a biologically significant resistance mutation in EGFR-amplified lung cancer. *J. Clin. Invest.* 116 2695-2706

Siehe auch <http://world.Transgenomic.com/files/literature/482146.pdf> für Literaturhinweise zur SURVEYOR Nuclease und ihrer Anwendungen.

Anhang B

Fehlersuche


Die effektive Verwendung der SURVEYOR Scan-Kits für DHPLC hängt von der erfolgreichen Ausführung einer Reihe von Arbeitsschritten ab. Einer der entscheidendsten ist die PCR-Amplifikation, die zur Produktion einer ausreichenden Menge spezifischer, gleichmäßig langer DNA führen muss, um nach der Hybridisierung und Spaltung nachgewiesen zu werden. Das wiederum hängt von der Qualität der Ausgangsprobe ab. Die Durchführung dieses Tests mit DNA, die nicht den Qualität- und Quantitätskriterien entspricht, ist nicht empfehlenswert.

Anmerkung: Wenn Sie zum ersten Mal mit SURVEYOR Nuclease arbeiten, führen Sie die Untersuchungen im Abschnitt **Verwendung von Kontrollplasmid-DNAs** durch, nachdem Sie den Abschnitt **Schritt-für-Schritt-Anleitung** gelesen und verinnerlicht haben. Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst von Transgenomic wenden, warten Sie bitte die Ergebnisse für die Kontrollplasmid-DNAs ab.

Diese Fehlersuche deckt eine Liste von Problemen ab, die bei der Arbeit mit den SURVEYOR Scan-Kits für DHPLC auftreten können, sowie Vorschläge, wie sie zu lösen sind.

Konsultieren Sie das Bedienungshandbuch des DHPLC-Systems für detaillierte Anleitungen in Bezug auf Gerätebetrieb und Wartung. Das Bedienungshandbuch enthält spezifische Verfahren zur Überprüfung und Wartung der Säulenleistung und beinhaltet Einzelheiten zur Fehlersuche.

Problem 1 – Niedrige PCR-Ausbeute oder kein PCR-Produkt, wenn auf Agarosegel analysiert

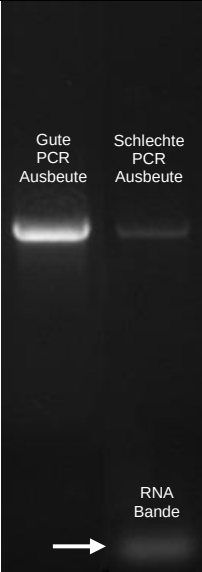
NIEDRIGE PCR-AUSBEUTE	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
	Schlechte Qualität der DNA-Matrize	Wiederholen Sie die Aufreinigung der DNA. Überprüfen Sie die verwendete Aufreinigungsmethode. Wenn die FFPE-extrahierte DNA zu fragmentiert ist, können alternative FFPE-Blocks erforderlich sein.
	Zu viel RNA in der Probe verursacht die Überbewertung der DNA-Konzentration	Wiederholen Sie die RNase Behandlung der DNA-Probe und reinigen Sie die DNA erneut.
	Thermocycler nicht kalibriert	Führen Sie die Kalibrierung des Thermocyclers durch.
	Nicht ausreichende Matrize	Erhöhen Sie die Matrizenmenge.

Anmerkung: Es sollte hochwertige DNA aus FFPE verwendet werden. Die DNA sollte eine durch Absorption bei 260 nm gemessene Konzentration von 25 ng/μL aufweisen, sowie ein Absorptionsverhältnis von 260:280 nm von größer 1,8 haben und größer als 90% DNA sein (d. h. nahezu frei von tRNA- und rRNA-Kontamination laut Agarosegelauswertung). DNA-Proben zwischen -20 °C und -80 °C aufbewahren.

Die Analyse von DNA-Matrize, die aus paraffineingebettetem Gewebe extrahiert wurde, erfordert mehrere Vorsichtsmaßnahmen. Die DNA kann mit Uracil-DNA-Glycosylase behandelt werden, um eine Amplifikation von DNA-Fragmenten zu vermeiden, die deaminierte C-Reste enthalten. Häufig wird ein hoher Prozentsatz des aus dem paraffineingebetteten Gewebe extrahierten A₂₆₀ Adsorptionsmittels bei der PCR nicht gut amplifiziert. Oft hilft eine größere Menge Start-DNA, um ein geeignetes Amplifikationsprodukt zu erhalten. Eine weitere Überlegung wäre, FFPE-Tumorschnitte mit einem hohen Prozentanteil an Tumorzellen zu wählen. Mikrodisektion kann ebenfalls verwendet werden, ist aber zeitaufwendig und für das normale Routinelabor nicht


empfehlenswert.

Problem 2 – Mehrere PCR-Produkte, wenn auf Agarosegel analysiert

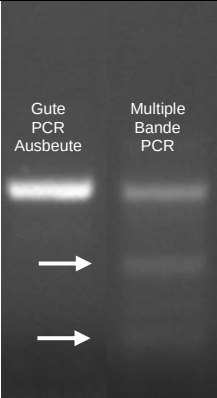MEHRERE PCR-PRODUKTE	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
	Anlagerungstemperatur zu niedrig	Überprüfen Sie die Kalibrierung des Thermocyclers.

Anmerkung: PCR sollte einen ausreichend hohen Ertrag (größer als 20 ng/μL) einer **EINZELNEN** amplifizierten Spezies der richtigen Länge erzeugen. **Für die PCR muss die in diesem Kit mitgelieferte DNA Polymerase und der DNA Polymerase 10X PCR Buffer verwendet werden.** Amplikons aus Kontrollen müssen mit der SURVEYOR Nuclease verdaut und analysiert werden, um durch Sichtprüfung der Chromatogrammprofile störendes Hintergrundrauschen auszuschließen (siehe **Beispielergebnisse, Abbildung 4**). Kontrollieren Sie vor dem Verdau jedes amplifizierte DNA-Produkt durch Gelelektrophorese (oder durch Analyse mit dem DHPLC-System), um sicherzugehen, dass es eine einzelne Spezies der erwarteten Länge ist.

Problem 3 – Keine Spaltprodukte bei der Analyse nach SURVEYOR Nuclease-Behandlung der Heteroduplices

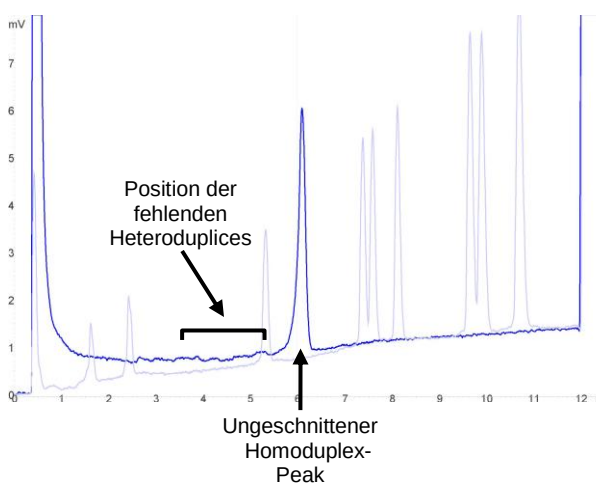KEINE SPALTPRODUKTE	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
	Anteil an Mismatch-Ziel zu gering	Test anhand der Kontrollen überprüfen.
	Ineffiziente Bildung von Heteroduplices	Führen Sie das PCR- und Hybridisierungsverfahren genau nach Anleitung durch. Verwenden Sie für den SURVEYOR Nuclease-Verdau frisch hybridisierte DNA. Wiederholen Sie die PCR-Amplifikation mit (1) derselben Menge DNA-Matrize, (2) erhöhen Sie die Menge Start-DNA, oder (3) isolieren Sie frische DNA von demselben oder einem anderen FFPE-Schnitt.
	Inaktive SURVEYOR Nuclease	Führen Sie eine Reaktion mit Kontrollen durch, um die Enzymleistung zu verifizieren. Nur frisch hergestellten SURVEYOR Nuclease Master-Mix verwenden.


Anmerkung: SURVEYOR Nuclease spaltet überwiegend bei Mismatches in Heteroduplices. Das Verhältnis von Heteroduplex zu Homoduplex in der hybridisierten Probe bestimmt das Verdausignal in der SURVEYOR Nuclease. Wenn die *NRAS*-Mutation in der genomischen DNA-Probe in sehr geringer Konzentration vorliegt, kann das Signal für ein positives Ergebnis zu niedrig sein.

Es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Hybridisierungsschritt im Thermocycler-Programm enthalten ist (siehe **Amplifikationsprotokoll**), um die Leistung der Heteroduplexbildung zu optimieren. Heteroduplices werden bei Standard-PCR-Reaktionen mit sehr geringem Ertrag gebildet.

Anmerkung: Der Signal-Rausch-Abstand ist im Allgemeinen hoch genug, um Mutationen mit einem geringeren Prozentsatz der Gesamt-DNA-Matrize nachzuweisen. Es ist möglich, bis 2% mutante DNA zu detektieren. **Abbildung 4** zeigt die mit Homoduplex und Heteroduplex *NRAS* Positive Control-DNAs (in diesem Kit enthalten) und FFPE-Proben generierten Verdauprodukte auf einem WAVE DHPLC 4500 System. Die Spaltprodukte sind deutlich als zwei neue Peaks zu erkennen, die mit der erwarteten Länge eluiert wurden, die anhand des DNA-Längenstandards berechnet werden können.

Achtung: Im Handel erhältliche PCR-Puffer unterscheiden sich stark in der Zusammensetzung und häufig ist die Zubereitung vom Hersteller nicht genau gekennzeichnet. Mehrere Puffer sind aufgrund von pH oder Zusatzstoffen, Tensiden oder anderen herstellereigenen Inhaltsstoffen mit der SURVEYOR Nuclease **NICHT** kompatibel. **Verwenden Sie KEINE andere als die im Kit enthaltenen Polymerase oder 10X Polymerase-Puffer.**


Problem 4 – Hohes Hintergrundrauschen nach SURVEYOR Nuclease-Behandlung

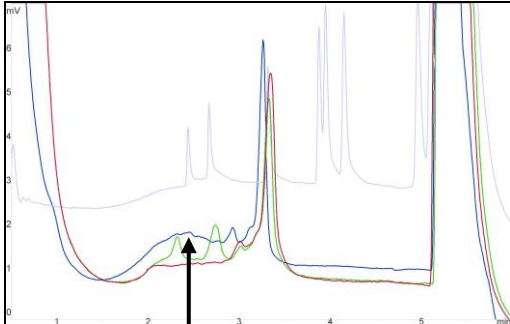HOHES HINTERGRUNDRAUSCHEN	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 DHPLC Durchfluss Probe mit verrauschter Basislinie DHPLC Wash	Nicht optimaler Hybridisierungsschritt	Führen Sie folgende Schritte durch: 1. Vergewissern Sie sich, dass sich die DNA-Konzentration im Bereich >25 ng/μL befindet. 2. Wiederholen Sie den Schritt Heteroduplex-Bildung, achten Sie dabei darauf, das empfohlene Verfahren einzuhalten; siehe 12.7.1.
	DNA-Menge zu niedrig	Überprüfen Sie die Ergiebigkeit und Qualität der DNA-Matrize
	Nicht-spezifische PCR-Produkte	Überprüfen Sie die Ergiebigkeit und Qualität der DNA-Matrize.
	SURVEYOR Enhancer W2 und/oder SURVEYOR Enhancer Cofactor wurden deaktiviert.	Überprüfen Sie das Ablaufdatum des Kits.


Anmerkung: Die SURVEYOR Nuclease schneidet gelegentlich bei doppelsträngigen DNAs an zufällig ausgewählten Gen-Orten ein. Dies erzeugt nach dem Verdau ein Hintergrundrauschen. Diese Aktivität wird durch den SURVEYOR Enhancer W2 und seinen Cofactor unterdrückt, ohne ansonsten die Mismatch-Spaltreaktionen negativ zu beeinträchtigen. SURVEYOR Enhancer W2 und SURVEYOR Enhancer Cofactor sind in diesem Kit enthalten und sollten immer verwendet werden.

Wenn dieses Anschneiden weiter auftritt, werden kleine Peaks auf dem DHPLC-System erzeugt. Durch Vergleich der Kontrollverdau von Homoduplices mit dem Probenverdau können diese erkannt werden.


Problem 5 – Peaks des SURVEYOR Nuclease-Verdau bei Negativkontrollen

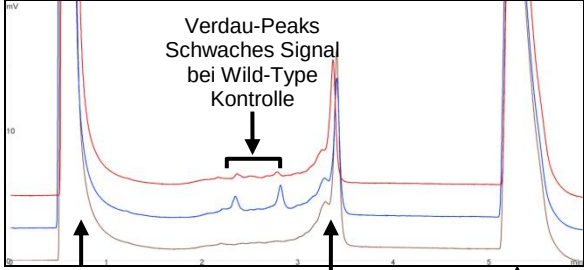VERDAU-PEAKS BEI NEGATIVKONTROLLEN	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 Verdau-Peaks Schwach Signal bei Wild-Type Kontrolle DHPLC Durchfluss Ungeschnittener Homoduplex-Peak DHPLC Wash	Kontamination von Kit-Bestandteile mit <i>KRAS</i> -Amplikons oder Plasmid-Kontrollen.	Alle Kit-Komponenten entsorgen und ein neues Kit verwenden. Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst von Transgenomic, um potenzielle Ursachen und Quellen der Kontamination zu besprechen.


Problem 6 – Fehlgeschlagene SURVEYOR Nuclease-Ergebnisse

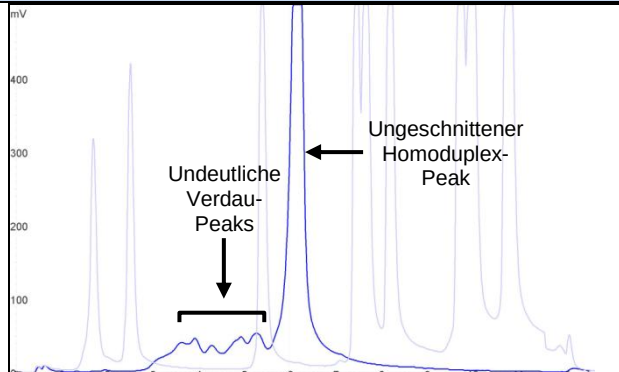DER SURVEYOR NUCLEASE-VERDAU DER POSITIVKONTROLLEN IST FEHLGESCHLAGEN	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 Undeutliche Verdau-Peaks Ungeschnittener Homoduplex-Peak	SURVEYOR Nuclease nicht hinzugefügt	Eine neue Probe verdauen.
	SURVEYOR Nuclease-Verdau wurde bei falscher Temperatur durchgeführt.	Eine neue Probe verdauen.

Problem 7 – Unerwartete Peaks in SURVEYOR Nuclease-Verdauspur

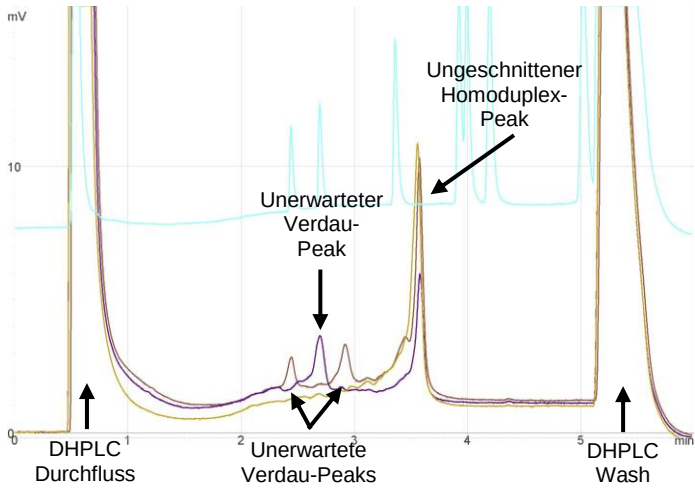DER SURVEYOR NUCLEASE-VERDAU DER POSITIVKONTROLLEN IST FEHLGESCHLAGEN	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 mV 10 0 0 1 2 3 4 5 min DHPLC Durchfluss Unerwartete Verdau-Peaks Unerwarteter Verdau-Peak Ungeschnittener Homoduplex-Peak DHPLC Wash	Mutation befindet sich an ungewöhnlicher Stelle.	Probe sequenzieren, um Mutation zu bestätigen.

Problem 8 – Kontamination von Probe mit Positive Controls

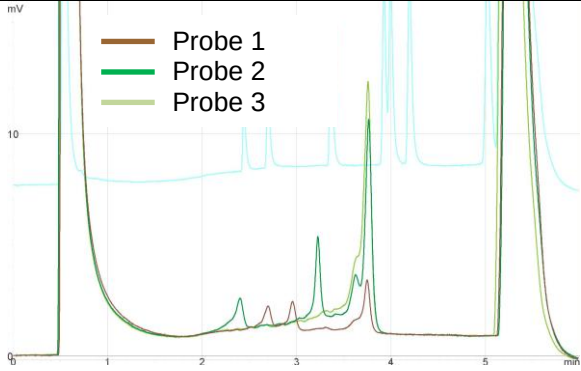Verdaumuster stimmen mit Anwesenheit von gestempelten Regionen der gemischten Positive Controls und Wild-Type-Heteroduplexes überein.	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 Region Codon 12 & 13 Region Kontrollstempel Probe 1 NVD in Codon 12 & 13 Stempel nachgewiesen Probe 2 c.34G>T p.G12C, 30% Kein Stempel nachgewiesen Probe 3 NVD in Codon 12 & 13 Kein Stempel nachgewiesen	Schlechte Pipettiertechnik	Beim Pipettieren der Proben besonders darauf achten, dass es nicht zur Kreuzkontamination kommt. Überprüfen Sie die Regionen der Kontrollstempelsequenz auf Kontamination der Positive Control.

Einzelheiten zur Bestellung

Produkt-nummer	Produktname	Menge
710104	SURVEYOR Scan <i>KRAS</i> Kit Exon 2 CE IVD	100 Reaktionen
710106	SURVEYOR Scan <i>KRAS</i> Kit Exons 3 & 4 CE IVD	100 Reaktionen
710400	SURVEYOR Scan <i>NRAS</i> Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD	100 Reaktionen
710077	CRC <i>RAS</i> can Combination Kit for <i>KRAS</i> and <i>NRAS</i> Exons 2, 3 & 4 CE IVD	230 Reaktionen

Kontaktdaten

Hauptniederlassung

Transgenomic, Inc.
12325 Emmet Street
Omaha
Nebraska 68164
United States of America

Tel.: (888) 233-9283* oder +1 (402) 452-5400

Fax: +1 (402) 452-5401

E-Mail: support@Transgenomic.com

*Nur in Nordamerika

Europa

Transgenomic Limited
40 Watt Road
Hillington Park, Hillington
Glasgow G52 4RY
United Kingdom

Tel.: +44 141 892 8800

Fax: +44 141 883 5967

E-Mail: support@Transgenomic.com

www.Transgenomic.com



Übersetzung Verzicht

Transgenomic, Inc. hat alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit dieser Übersetzung sorgen gemacht. Wenn Sie Fragen zu Angaben in dieser übersetzte Version des Handbuchs haben, auf die englische Version Instructions for Use for the SURVEYOR® Scan *NRAS* Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD for DHPLC Systems – 482296(EN)

<http://world.Transgenomic.com/files/literature/482296-EN.pdf> und / oder Kontakt zu verweisen Transgenomic support @transgenomic.com.

Lizenzen, Handelsmarken & Copyright

SURVEYOR Nuclease: Dieses Produkt wurde unter exklusiver Lizenz der US-Patente 6,699,980; 6,391,557; 5,869,245, ihrer ausländischen Entsprechungen und weiterer anhängiger Patente hergestellt. Für die Verwendung von SURVEYOR Nuclease ist eine Lizenz von Transgenomic erforderlich. Akademische, Non-Profit und For-Profit-Organisationen besitzen mit Kauf dieses Produkts eingeschränkte Rechte, die SURVEYOR Nuclease zu Forschungszwecken zu nutzen. Ein Weiterverkauf bzw. eine anderweitige Verwendung sind streng verboten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Transgenomic.

DNA Polymerase: Die Verwendung dieses Produkts ist durch eine oder mehrere der folgenden US-Patente sowie zugehörige Patentansprüche außerhalb der USA geschützt: 5,789,224; 5,618,711; 6,127,155 sowie Ansprüche außerhalb der USA zugehörig zu US-Patent Nr. 4,889,818. Der Kauf dieses Produkts schließt ein eingeschränktes, nicht übertragbares Nutzungsrecht dieses Produkts für eigene Forschungszwecke des Käufers ein. Es wird damit kein Recht unter einem anderen Patentanspruch (wie die patentierten 5'Nuclease-Verfahrensansprüche unter US-Patent-Nummern 5,210,015 und 5,487,972), kein Recht zur Durchführung einer patentierten Methode sowie kein Recht zur Durchführung jedweder kommerzieller Dienstleistungen, insbesondere die Übermittlung von Ergebnissen der Tätigkeiten von Erwerbern gegen ein Honorar oder andere wirtschaftliche Gegenwerte, weder ausdrücklich noch implizit bzw. durch Rechtsverwirkung abgetreten. Dieses Produkt dient ausschließlich Forschungszwecken. Für die diagnostische Verwendung unter Roche-Patenten ist eine separate Lizenz von Roche erforderlich. Für weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen wenden Sie sich an den Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.

Transgenomic, SURVEYOR und WAVE sind eingetragene Marken, und Navigator, das Helix-Logo und Advancing Personalized Medicine sind Marken von Transgenomic, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2013 Transgenomic, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

Dokument Nr. 482296(DE) rev 2